



## 『長年ご使用のスキンクールパットの点検を!』

●ご使用前に必ずクール・フォトヘッド部に損傷がないかお確かめください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

●当製品の保証書をご記入いただいた後は、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書					持込修理
品名	スキンクールパット	品番	TE100	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日		年	月
★お客様	ご芳名 ご住所(〒) お電話	様	★販売店	住所・店名 電話	

株式会社 **テスコム**  
www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7  
工場/長野県松本市筑摩4-1-20

TESCOM

# スキンクールパット

## 品番: TE100

スキンクールパット TE100

## もくじ

## 取扱説明書

## 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。



安全上のご注意 ..... 1・2

各部のなまえとはたらき ..... 3  
充電のしかた ..... 4お使いになる前に ..... 5  
使いかた ..... 6・7  
充電の時期について /  
海外でのご使用について /  
交流式で使うには ..... 8お手入れのしかた ..... 9  
製品を廃棄するとき  
ニッケル水素電池の外しかた ..... 10  
アフターサービスについて ..... 11故障かな?と思ったら ..... 12  
Q&A ..... 13・14  
仕様 ..... 14  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## △ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## △ 警告

次の人へは、医師と相談してご使用ください。

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人 ● 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人 ● 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人 ● 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人 ● 妊娠中の人は
- 生理中の場合 ● アトピー性皮ふ炎の人
- アレルギー体質の人 ● 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人 ● 齒の治療中の人は
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

下記の部位には使用しない。

- 整形手術をした部位 ● 眼球および上まぶた
  - 傷口 ● 顔面黒皮症 ● 口の中等粘膜の部位
  - ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
  - 痛覚、知覚障害を起こしている部位
  - 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んでいる部位
  - カユミやはべり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
  - 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位
- 事故やけがの恐れがあります。



禁止

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。

肌トラブルや痛みの原因になります。

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

## 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと」(強制)の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は必ず守る)

子供に使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない。  
事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。  
キャップなどの小さな部品は誤飲の原因になります。

乳幼児や子供・ペットには使わない。  
事故やけがの恐れがあります。



禁 止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源アダプターの根元が変形、傷んでいるとき。

電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)  
火災・感電の恐れがあります。



電源アダプターに電源コードを巻きつけない。  
電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

## Q8. 1日に何回使用して良いですか。

- 1日2回までです。

→過度な使用はお肌への負担をかける原因になるためお止めください。また、お肌の状態や体調によって効果には個人差がある場合があります。

(1回の使用はフォトエステ5分、クールエステ5分で合計10分までです)

## Q9. フォトエステ、またはクールエステだけでも効果はありますか。

- どちらか一方でのご使用もできますが、フォトエステとクールエステを連続して使用すると効果的です。

## Q10. クールエステ使用時に本体が熱くなる。

- 異常ではありません。

→そのまま使用してください。

## Q11. その他のトラブル

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(11ページ)にご相談ください。

## 仕様

品名	スキンクールパット	定格時間	フォトエステ: 5分(自動OFF) クールエステ: 5分(自動OFF)
品番	TE100		
電源アダプター	AC100-240V 50/60Hz	充電時間	約5時間
本体	ニッケル水素電池 (DC3.6V,800mAh) 1組		
消費電力	交流使用時 10W	質量	120g (本体)
フォトエステ	交流使用時 2W		
寸法	高さ111×幅46×奥行き40mm (本体)	付属品	キャップ 電源アダプター 世界の電圧と プラグ一覧表



# Q&A

## Q1. 顔以外の部位に使用できますか。

- 顔専用のため、顔以外の部位には使用できません。

## Q2. 化粧水をつけたあとに使用できますか。

- 使用できます。  
→ただし、化粧水に働きかけるような効果はありません。  
化粧水をつけたあとは、必ず肌がぬれていらない状態でご使用ください。  
故障の原因になります。

## Q3. シミを取ったり、美白効果はありますか。

- シミを取ったり美白効果はありません。

## Q4. フォトエステとは何ですか。

- エステティックサロン等で利用されている美容方法を一般家庭用につくりました。

## Q5. フォトエステの光は熱くないのですか。

- フォトエステの光はLEDで、ほとんど熱を持たない光です。

## Q6. お風呂で使用できますか。

- お風呂場での使用はできません。  
→防水構造ではないため、水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保存しないで下さい。
- お風呂上りの肌を引き締めるためには使用できます。  
→水分をふき取った後に使用してください。

## Q7. 使用できない肌の具合はどのような場合ですか。

- 「安全上の注意」(1ページ)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

## 安全上の注意

### ⚠ 注意

ほかの美容器具と同時に使用しない。  
事故や怪我の恐れがあります。

落したり、ぶつけたりしない。  
本体に強い衝撃を与えない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺菌剤をかけたりしない。  
ひび割れ・感電・発火の可能性があります。

付属の電源アダプター以外は使  
用しない。付属の電源アダプター  
で他の製品を充電しない。  
感電・発火の恐れがあります。

業務用として使わない。また、  
不特定多数の人が使う場所に  
置かない。  
連続使用による故障の恐れがあります。

損傷したら使わない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。

家族や他人と共に用しない。  
感染症の恐れがあります。

使用前に、クールヘッド・フォト  
ヘッドに傷や変形がないか確認  
する。  
肌を傷つける恐れがあります。

イヤリングやネックレス等のアクセ  
サリー・コンタクトレンズは、はず  
して使用する。  
事故やけがの恐れがあります。

コンセントから電源アダプターを  
抜くときは、電源コードを持たず  
にアダプター本体部を持って抜く。  
感電・感電の恐れがあります。



禁 止

交流100-240V以外の電源は  
使用しない。

火災や感電の恐れがあります。

フォトエステの光を長時間直視しない。  
事故やけがの恐れがあります。

使用中痛みや不調を感じたときや、  
使用後肌に異常を感じたときは、  
使用を中止して専門医に相談する。  
肌トラブルの原因になります。

クールエステは、周囲温度10～  
40°Cで使用する。  
肌を傷める恐れがあります。




必ず守る

本体に異音や異常が発生したら  
直ちに使用を中止する。  
事故やけがの恐れがあります。

使用時間や使用頻度は取扱説明  
書の指示を守る。  
事故やけがの恐れがあります。

使いはじめの方は、肌の様子を  
見ながら使用する。  
肌トラブルや体調不良の原因になります。

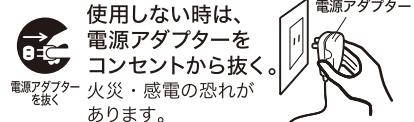

使用しない時は、  
電源アダプターを  
コンセントから抜く。  
火災・感電の恐れが  
あります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターをコン  
セントに抜き差ししない。

故障・感電・ショートの原因になります。



水ぬれ禁止

水洗いは絶対にしない。また水に  
つけたり水をかけたりしない。

故障やショートの原因になります。



水場禁止

浴室など水のかかる所や湿気の  
多い所で使用しない。

故障やショートの原因になります。




分解禁止

改造はしない。修理技術者以外  
の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。




# 各部のなまえとはたらき

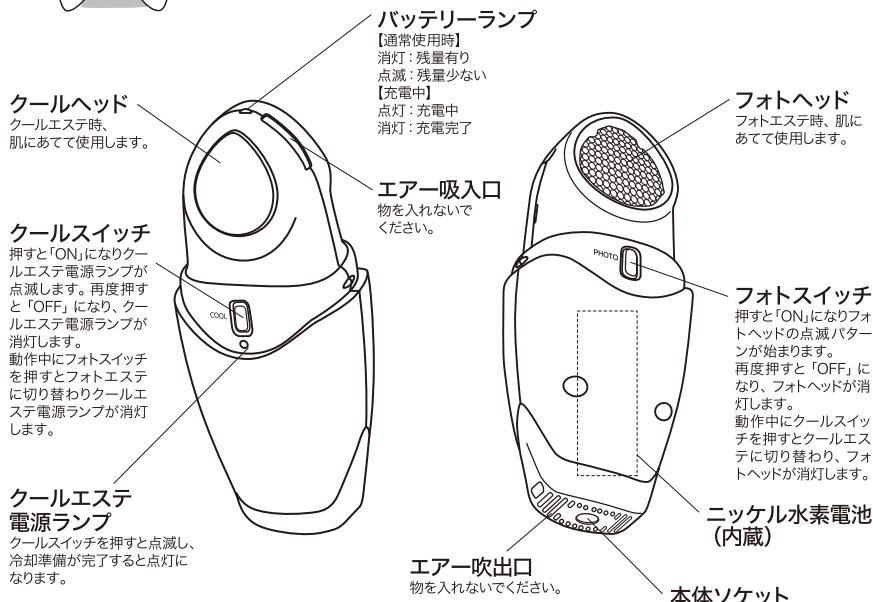

## ■付属品

### ※電源アダプター

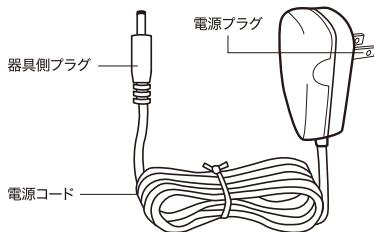

### ※キャップ



## 世界の電圧とプラグ一覧表

※印の部品は、部品注文が出来ます。販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。  
ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>



# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
クールヘッドが冷えない。	クールスイッチが「ON」になっていない。	クールスイッチを入れ、クールエステ電源ランプが点滅から点灯に変わることを確認する。
エア吸入口・吹出口をふさいでいる。	エア吸入口・吹出口をふさがないよう正しく持つ。	エア吸入口・吹出口をふさがないよう正しく持つ。
充電切れになっている。	充電するか交流式でご使用ください。	充電するか交流式でご使用ください。
フォトヘッドが光らない。	フォトスイッチが「ON」になっていない。	フォトスイッチを入れる。
充電切れになっている。	充電するか交流式でご使用ください。	充電するか交流式でご使用ください。
バッテリーランプが点滅へ変わるのが早い。	未使用期間が3ヶ月以上あった。(自然放電してしまった)	充電してください。
充電しても使用できる回数が少ない	残量が多く残っているのに充電をしていた。(継ぎ足し充電) ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	電池を使い切ってから充電する。 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(11ページ)
充電できない。	電源アダプターの取り付け方が悪い。 電源アダプターが故障している。	電源アダプターを本体とコンセントにしっかりと取り付けてください。 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(11ページ)
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	電源コード・電源アダプターの取り付け方が悪い。 コンセントの差しみがゆるい。	本体の本体ソケットに電源アダプターの器具側プラグをしっかりと差してください。 コンセントに原因がある場合があります。最寄の電気店にご相談ください。
電源アダプターを接続して使用できない。(交流式で電源が入らない)	電源アダプターが故障している。 又は本体が故障している。	「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(11ページ)

その他の異常・故障がある場合、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

 0120-343-122  
HDMI-PHS OK

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

 0120-106-018  
HDMI-PHS OK

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7





# 充電のしかた

- 1 クールスイッチ・フォトスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

- 電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無理に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。

- 2 バッテリーランプが消灯したら電源アダプターを本体とコンセントから抜きます。

- 標準充電時間は、約5時間です。
- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがあります、異常ではありません。
- 1回の充電で約5セット使用できます。(1セット: フォトエステ5分+クールエステ5分)  
(お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります)

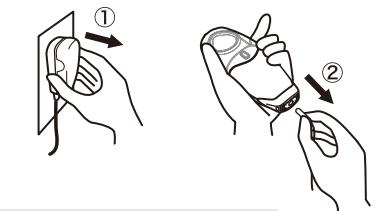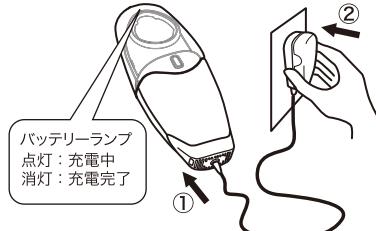

充電中はバッテリーランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

## ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- 保管する場合は、必ず充電してから保管する。
- 長期間使用しない場合も、半年に1回程度は定期的に充電する。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、以下の手順で電池をリフレッシュすると動作時間が回復することがあります。

1. 「製品を廃棄するとき」(10ページ) の手順「1」のみを行ってください。電池を放電します。
2. 通常通りに充電してください。

上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられますので、お買い求めの販売店または、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

## ご注意

- お買い求めの際、4ヶ月以上使わなかったときは、充電してから使う。
- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから抜く。
- 周囲温度は、10～40°C以内で使う。
- 充電完了後もすぐに使えなくなるときは、ニッケル水素電池の寿命が近づいています。(12ページ)



# 使いになる前に

**△ 警告**

次の人には、医師と必ず相談してご使用ください。  
事故やけがの恐れがあります。

- 心臓に障害のある人
- 急性（疼痛性）疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人は
- 生理中の場合
- アトピー性皮ふ炎の人
- アレルギー体质の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- 齒の治療中の人は
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。  
事故やけがの恐れがあります。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやはたり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

※お肌のお手入れは、1日各エステ2回を目安とし、1回のご使用時間は各エステ5分以内です。  
5分を超える連続使用は、肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。

## 洗顔を行い、汚れを洗い流す。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。
- 化粧を落とした素肌でご使用ください。

肌が乾燥する場合は、化粧水をつけてからご使用ください。  
化粧水をつけたあとは、肌がぬれていないう状態でご使用ください。  
※乳液やゲル状の化粧水はつけないでください。

# 製品を廃棄するとき



製品を廃棄するとき以外は分解しない。

## 充電式電池のリサイクルにご協力ください。

- 本製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源が使用されています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り外していただき、リサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへのご協力をお願いいたします。
- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。



ニッケル水素電池は、リサイクルへ

## 【ニッケル水素電池の外しかた】

この説明は、製品を廃棄するための説明です。（修理をお勧めする説明ではありません）  
この製品は、お客様による修理はできません。


1 クールスイッチとフォトスイッチを同時に連続10秒以上押してください。

- クールエステ電源ランプとバッテリーランプが点滅したら、スイッチを押すのをやめます。  
ランプが消灯するまで放電します。

2 フォトヘッド側を上にしてゴムキャップを2個はずします。

3 ネジを2本はずします。

4 本体ケース上下のスキマに $\ominus$ ドライバーを差し込んで本体ケースをはずします。

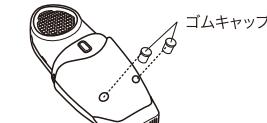

5 ニッケル水素電池のコネクターを抜き、本体ケースから取り出します。






# お手入れのしかた

電源が「OFF」になっていること、電源アダプターが取り外されていることを確認してからお手入れをします。

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ります。


●汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取ります。

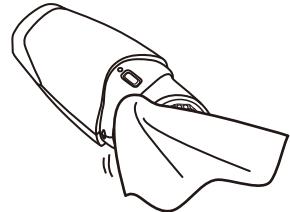

●定期的なお手入れ

定期的（月1回以上）にエアーアクションヘッドの溝をお手入れをします。ホコリなどを、やわらかい歯ブラシなどで取り除きます。

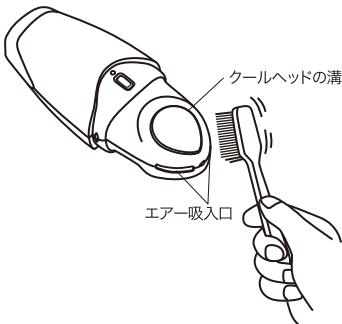

※エアーアクションヘッドの溝から本体の中へホコリ等が入らないように気をつけてください。

**ご注意**

- 電源は必ず「OFF」にする。誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。
- 本体は水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかない。変形、変色の原因になります。



# 使いかた

本製品は2種類のエステ機能があります。

フォトエステ：光を届け、肌の弾力をサポート  
クールエステ：ひんやり冷却で毛穴の引き締め

各エステとも1日2回（1回5分以内）を超える使用は避けてください。  
フォトスイッチもしくはクールスイッチを押して5分経過すると自動OFFします。

## ステップ1 フォトエステ

⚠ 警告

- 目のまわりに使用するときは、まぶしいので目を閉じてください。
- 光を長時間直視するのは避けてください。  
事故やけがの恐れがあります。

ご使用時間は5分以内です。

### 1 キャップをはずします。

### 2 フォトスイッチを長押しします。

- フォトヘッドがゆっくり点滅します。

フォト点滅パターン  
(イメージ)



### 3 ヘッドを毛穴の気になる部分（小鼻、頬など）の中心に軽くあて、ゆっくり移動させます。

- ご使用時間は5分以内です。フォトスイッチを押して5分経過すると自動で電源が切れます。



### 4 5分経つと自動で電源が切れます。

- その際に、終了音（ピッピッピッピッ）でお知らせします。
- 中断したい場合は
- フォトスイッチを再度押すとフォトヘッドが消灯します。

## ステップ2 クールエステ

### 使いかた

<b>！警告</b>	目や耳のまわりのお手入れはしない。 (事故や体調不良を起こす原因になります)
<b>！注意</b>	肌にケガや傷がある場合は絶対に使用しない。 (肌のトラブルや痛みの原因になります)
	同一部位への使用は1秒以内とすること。 (肌のトラブルや痛みの原因になります)

ご使用時間は5分以内（冷却準備時間を含む）です。

- 1 キャップをはずします。
- 2 クールスイッチを長押し。
  - クールエステ電源ランプが点滅します。
  - 冷却準備が完了し、クールエステ電源ランプが点灯するまで待ちます。（準備完了まで約60秒かかります）
- 3 クールエステ電源ランプが点灯したら使用開始。クールヘッドを指先で確認します。
  - クールヘッドの温度が低すぎると感じた場合は周囲温度が高い場所で使用してください。
  - 使用中の音は冷却音です。異常ではありません。
- 4 エアーアンダーポジションをふさがないように持ちます。
  - エアーアンダーポジションをふさいでしまうとヘッドが十分に冷えませんので注意してください。
- 5 ヘッドを毛穴の気になる部分（小鼻・頬など）を中心に軽くあて、パッティングの要領でゆっくり移動させます。
  - 同一部位への使用は1秒あてて1秒はなすを繰り返します。
  - クールスイッチを押して5分経過すると自動で電源が切れます。
  - 使用中に本体が温かくなりますが異常ではありません。
- 6 5分経つと自動で電源が切れます。
 

その際に、終了音（ピッピッピッ）でお知らせします。

中断したい場合は

  - クールスイッチを再度押すと、クールエステ電源ランプが消灯し冷却動作が停止します。

電源が切れたあと、しばらくするとクールヘッドと本体の温度が一時的に上がりますが異常ではありません。

### ご注意

- 直射日光の当たる所（夏期の自動車内など）、熱器具の近くに放置しない。変形、変色の原因になります。
- 水のかかる所や浴室などの湿気の多い所に放置しない。故障の原因になります。
- 電源アダプターのコードは、結んだり、電源アダプターに巻きつけたりしない。コードが損傷してショート・断線の原因になります。



### 長期保管のしかた

- お手入れ（9ページ）をしてから保管してください。
1. キャップをヘッドにかぶせてください。
  2. 必ず充電をしてください。
  3. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。

### 【充電の時期について】

- 电池切れの合図は、電源が入っている時にバッテリーランプが点滅するとともに警告音（ピッ、ピッ、ピッ…）が10秒間鳴り、電源が自動的に切れます。→すぐ充電してください。
- 引き続きご使用になる場合は交流式でお使いください。



### 【海外でのご使用について】

- 本製品は交流100-240V電源で使用できます。
- 国や地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。
- 付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。

### ！注意

ご使用になる前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。

必ず交流100-240V電源でご使用ください。交流240Vを超える電源でご使用になりますと、故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

### 【交流式で使うには】

### ！警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。（感電・ショートの原因になります）

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

- 2 フォトエステ、またはクールエステを開始します。

使いかた（6～7ページ）に従って使用します。

- 3 使用後は、必ず電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

続けて充電したい場合は

「充電のしかた」（4ページ）にしたがって充電してください。

### 使いかた