

超音波ピーリング

品番：TE210

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してく
ださい。

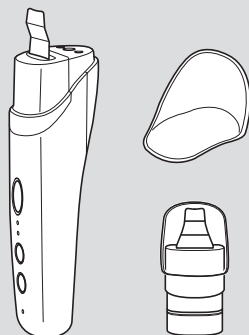

もくじ



安全上のご注意 …………… 1～3

各部のなまえとはたらき …… 4・5
充電のしかた …………… 6お使いになる前に …………… 7
使いかた …………… 8～12
安全装置について/
充電の時期について/
海外でのご使用について …… 13
仕様 …………… 13お手入れのしかた …………… 14
製品を廃棄するとき
ニッケル水素電池の …… 15
外しかた(廃棄時)故障かな?と思ったら …… 16
Q&A …………… 17
アフターサービスについて … 18
保証書 …………… 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は必ず守る)

⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - 心電計などの装着型医用電気機器
- 医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。



禁止



必ず守る

- 特に肌が敏感な人
 - 血友病疾患の人
 - 歯の治療中の人
 - ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合
- 事故やけがの恐れがあります。

⚠ 警告

次の人は医師と相談してご使用ください。

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人



必ず守る

下記の部位には使用しない。

- 整形手術をした部位
 - 眼球および上まぶた
 - 傷口
 - 顔面黒皮症
 - 口の中等粘膜の部位
 - ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
 - 痛覚、知覚障害を起こしている部位
 - 皮膚の下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部位
 - カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
 - 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位
 - 目や耳のまわり
- 事故やけがの恐れがあります。



禁止

安全上のご注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌トラブルや痛みの原因になります。

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
 - 電源コード・電源アダプターの根元が変形、傷んでいるとき。
- 電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。


電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)

火災・感電の恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・感電の恐れがあります。

電源アダプターに電源コードを巻きつけない。

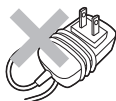

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供には使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。
水タンクキャップなどの小さい部品は誤飲の原因になります。

乳幼児や子供・ペットには使わない。
事故やけがの恐れがあります。



禁止

交流100-240V以外の電源は使用しない。

火災や感電の恐れがあります。

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

肌トラブルの原因になります。

本体に異音や異常が発生したら直ちに使用を中止する。



必ず守る

事故やけがの恐れがあります。

使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。

事故やけがの恐れがあります。

使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用する。

肌トラブルや体調不良の原因になります。



電源アダプターを抜く

使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。
故障・感電・ショートの原因になります。



禁止

水洗いは絶対にしない。また水につけたり水をかけたりしない。
故障やショートの原因になります。



禁止

水の中に落とさない。水の中に放置しない。水の中につけない。
故障・ショートとの恐れがあります。

電源アダプターは浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートとの恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

他の美容器具と同時に使用しない。
事故やけがの恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺菌剤をかけたりしない。

ひび割れ・感電・発火の可能性あります。



禁止

付属の電源アダプター以外は使用しない。付属の電源アダプターで他の製品を充電しない。

感電・発火の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続使用による故障の恐れがあります。

損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

家族や他人と共用しない。
感染症の恐れがあります。

肌をぬらさずに使用しない。
肌トラブルの原因になります。



禁止

除毛、脱毛した直後の箇所に使用しない。

肌のトラブル・事故になる可能性があります。

乳幼児やペットの近くで使用しない。
乳幼児・ペットを驚かせる恐れがあります。

スパチュラを肌以外の異物に触れさせない。

製品の故障、肌のトラブル・事故になる可能性があります。

水タンクに水を入れたまま、保管しない。

フェルトの異臭、水漏れによるトラブルを引き起こす恐れがあります。

浴室や湿気の多い所で保管しない。
故障・ショートとの恐れがあります。

イヤリングやネックレス等のアクセサリ・コンタクトレンズは、必ずして使用する。

事故やけがの恐れがあります。

ひどい肌荒れや皮ふ表面に凹凸がある場合、またはうぶげやヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。その際には、その部位への使用を控える。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

スパチュラは肌の同一部位に留めず移動させる。

肌トラブルや体調不良の原因になります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずにアダプター本体部を持って抜く。

火災・感電の恐れがあります。

ボディキャップをつけて保管する。
ミストが発生しなくなる恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

ミスト吹出し口

ヘッド挿入部

ミストボタン

動作中、ミストボタンを押しているとき、ミストが出ます。ミストが出ている間はスパチュラの振動が停止します。

ヘッド表示ランプ

動作中、挿入しているヘッドを表示します。

切替スイッチ

ピーリングの強弱(HI/LOW)を切替えます。
HI: 青 LOW: 緑

電源スイッチ

1秒間長押しすると「ON」になります。

電源スイッチ: 赤点灯


切替スイッチ: 緑点灯

ヘッド表示ランプ: 緑点灯

※挿入ヘッドに応じて点灯します。

再度押すと「OFF」になります。

本体ソケット

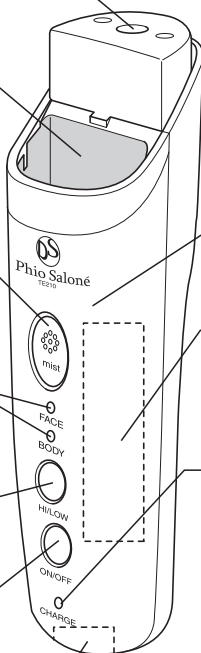

本体

ニッケル水素電池
(内蔵)

バッテリーランプ

【通常使用時】

消灯

【充電中】

点灯: 充電中

消灯: 充電完了

【電池切れ】

10秒間フラッシュ後、消灯
(警告音あり)

各部のなまえとはたらき




※水タンクカバー



■付属品

※ボディキャップ

本体を保管する時に
つける。

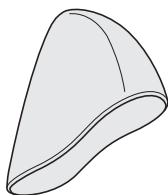

ボディ(BODY)
用ヘッド



※サブキャップ

ヘッド単体 (フェイス用
ヘッド/ボディ用ヘッド)
を保管する時につける。




フェイス(FACE)
用ヘッド



スパチュラ

※電源アダプター

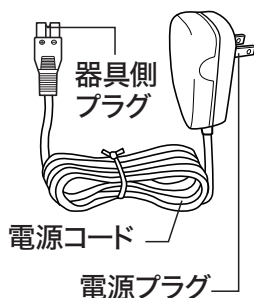

世界の電圧とプラグ
一覧表


※印の部品は、部品注文が出来ます。販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>




充電のしかた

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

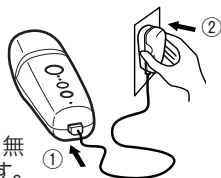

- バッテリーランプが点灯します。
- 電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無理に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。
- 電源電圧は100-240Vであることを確認してください。
- 国や地域により電圧及びプラグ形状が異なる場合があります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。

2 バッテリーランプが消えてから、電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

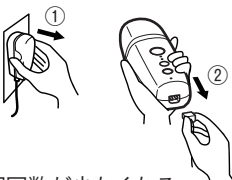

- 標準充電時間は、約5時間です。
- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 1回の充電で、約6回(1回10分)使用できます。
(お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります)

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- 保管する場合は、必ず充電してから保管する。
- 長期間使用しない場合も、半年に1回程度は定期的に充電する。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、以下の手順で電池をリフレッシュすると、動作時間が回復することがあります。

1. 「製品を廃棄するとき」(15ページ)の手順「1」のみを行ってください。電池を放電します。
2. 通常通りに充電してください。

上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命であると考えられますので、お買い求めの販売店または、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

ご 注 意

- 充電中に電源スイッチを押しても電源を「ON」することが出来ません。
- お買い求めの際、4ヶ月以上使わなかったときは、充電してから使う。
- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから抜く。
- 周囲温度は、10～40℃以内で使う。
- 充電を完了しても、すぐ使えなくなるときは、ニッケル水素電池の寿命が近づいています。(→16ページ)



お使いになる前に

⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。

医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

⚠ 警告

次の人は、医師と必ず相談してご使用ください。

事故やけがの恐れがあります。

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- 歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。

事故やけがの恐れがあります。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んだ部位
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

※お肌のお手入れは、1日1回まで、1回10分以内です。

週に1～2回を目安としてください。

10分を超える連続使用は、肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。

洗顔を行い、汚れを洗い流す。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。

洗顔後の素肌にご使用ください。

肌を水(もしくはミスト)でぬらした状態でご使用ください。



使いかた



警告

目や耳のまわりのお手入れはしない。
(事故や体調不良を起こす原因になります)

肌にケガや傷がある場合は絶対に使用しない。
(肌のトラブルや痛みの原因になります)

お肌のお手入れは、1日1回まで、1回10分以内です。週に1～2回を目安としてください。
電源スイッチを押して10分経過すると自動OFFします。


1 ボディキャップをはずします。

2 付属の「ボディ用ヘッド」または「フェイス用ヘッド」のいずれかを本体に装着してください。


ヘッドは、奥までしっかり差し込んでください。

※ご購入時はボディ用ヘッドが装着されています。


- 電源が入った状態でヘッドを外さないでください。
- ヘッドの装着が不十分なとき、ヘッドを装着していないときは電源が入りません。
- 浴室でご使用の際、ヘッド入れ替えのときや、ヘッド装着が不十分なときにヘッド挿入部に水が入ると、安全装置が働いて電源が切れます。故障ではありません。(→13ページ)
- ヘッドを外すときは製品を図のように横向きにし、両サイドの指かけ部を持ち、ゆっくり引き抜いてください。
ぬれた手や、ヘッドを顔に向けた状態で外そうとすると、スパチュラの先端だけがをすることがあります。
- ヘッドを外す際、スパチュラを持って抜かないでください。
超音波の振動不良など、故障の原因になります。

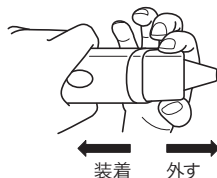

3 裏面の水タンクカバーを外し、水タンクを取り出します。

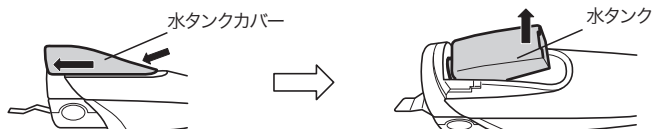


4 水タンクキャップを外し、水タンクに精製水もしくは水道水を水位上限まで入れてください。水タンクキャップをしっかりと締め、水タンクに付いた水滴をふき取ってから本体へセットします。

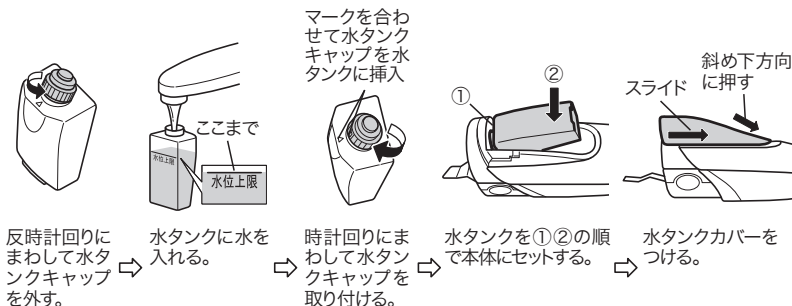

- 肌がぬれている場合や、ミスト機能を使用しない場合は水タンクに水を入れなくても使用できます。ただし、ピーリング中にミストボタンを押してもミストは噴霧しません。
- 精製水・水道水以外は使用しないでください。
- 子供の近くで使用しないでください。水タンクキャップは誤飲する可能性があります。

5 電源スイッチを長押しし、電源を入れます。


- 「ピッ」と音がなり、装着したヘッドを認識してヘッド表示ランプが点灯します。
- 電源を入れてから約10分経過すると自動で電源が切れます。
- ヘッド挿入部に水がある状態でヘッドを装着した場合、電源スイッチを長押ししても、安全装置が働き電源が入らないことがあります。(→13ページ)

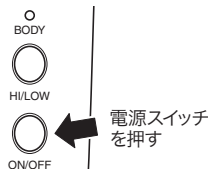

6 切り替えスイッチを押し、ピーリングの強弱を選択します。


スイッチを押す毎にHI/LOWが切り替わります。
起動時は「LOW」モードに設定されています。

HI・・・青 LOW・・・緑

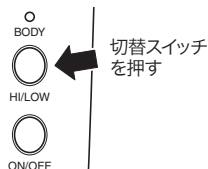

- 使い始めは「LOW」の設定で使用時間を短くしてご使用ください。(→17ページ)
- 使用中に違和感を感じたときは、ご使用を中止してください。

7 ピーリングしたい箇所にミストを噴霧し、肌をぬらしてからスパチュラを肌に軽くあてて、ゆっくり滑らせながら動かします。

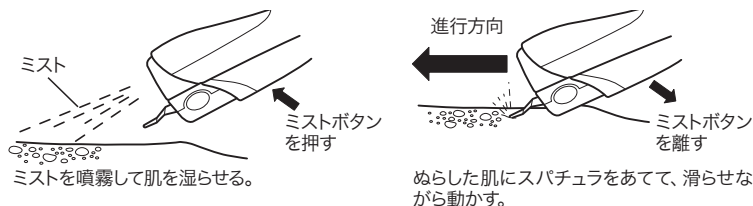

肌につけたミストが霧状にはじかれるようにスパチュラの角度を調整してください。

- 使用中、使用後、お手入れ箇所に発赤や発疹、かゆみなどの不調を感じたときは、使用を中止して、直ちに専門医へご相談ください。
- 同一箇所に何度も使用しないでください。
- 必ず肌をぬらしてピーリングしてください。
- スパチュラを肌に強く押しあてないように使用してください。
- スパチュラの金属部分に汚れが付きましたら、その都度やわらかいタオルやティッシュペーパーなどでふき取ってください。
- 水タンクに水が入っていないときはミストは発生しません。
- スパチュラ先端に大きな水滴がのっていると、肌に付いている水滴が霧状にはねにくくなります。水滴をふいてから使用してください。
- ミストボタンを押している間はスパチュラの振動は停止します。故障ではありません。
- 滑らす目安は、3秒間に10cmくらいのスピードでスパチュラを移動させ、一ヶ所にとどめないようにしてください。

8 使用後は、電源スイッチを切ります。水タンク中の水を捨て、ヘッド・本体のお手入れをします。(→14ページ)


ボディキャップ・サブキャップを付け、湿気の少ないところに保管します。

長期保管のしかた

- お手入れ(→14ページ)をしてから保管してください。
1. 水タンク中の水を捨て、水タンク・水タンクキャップをよく乾かしてください。
 2. 本体にヘッドを装着して、ボディキャップをかぶせてください。
 3. 残りのヘッド単体にはサブキャップをかぶせてください。
 4. 必ず充電をしてください。
 5. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。

【フェイス用ヘッドの使い方】

- ①フェイス用ヘッドを本体に装着します。電源スイッチを入れた際に、ヘッド表示ランプ(FACE)が点灯していることを確認します。
- ②ミストボタンを押してミストを噴霧し、肌をぬらします。
 - スパチュラ先端を肌にあてないように注意してください。
- ③ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、下から上に向かってゆっくり動かします。
 - 使用中に「キーン」という音が聞こえますが、故障ではありません。

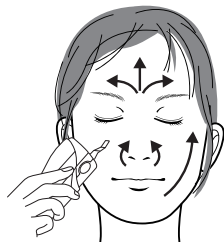

●フェイスライン



●アゴ&口元



●ホホ



●小鼻周り




- ④ご使用後は、いつものお肌のお手入れを行ってください。
 - 化粧水で肌を整えて、乳液などで油分を補ってください。
- ⑤ご使用後、ヘッドの汚れを柔らかい布もしくはティッシュペーパーなどでふき取ってください。


【ボディ用ヘッドの使い方】

- ①ボディ用ヘッドを本体に装着します。電源スイッチを入れた際に、ヘッド表示ランプ(BODY)が点灯していることを確認します。
- ②ミストボタンを押してミストを噴霧し、肌をぬらします。
●スパチュラ先端を肌にあてないように注意してください。
- ③ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、外側に向かってゆっくり動かします。
●使用中に「キーン」という音が聞こえますが、故障ではありません。

●ヒザ

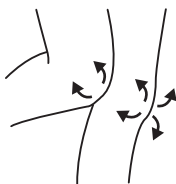

●かかと

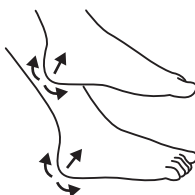

●ヒジ




- ④ご使用後にクリームなどで油分を補い、保湿してください。
- ⑤ご使用後、ヘッドの汚れを柔らかい布もしくはティッシュペーパーなどでふき取ってください。

応用編

●デコルテ

- フェイス用ヘッドをお使いください。
- ①ミストボタンを押してミストを噴霧し、肌をぬらします。
●スパチュラ先端を肌にあてないように注意してください。
- ②ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、下から上に向かってゆっくり動かします。
- ③ご使用後にクリームなどで油分を補い、保湿してください。

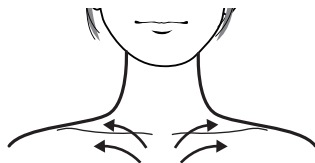

【安全装置について】

- ヘッド挿入部に水が入ると、安全装置が働き電源が切れたり入らなくなったりします。
→このようなときは、ヘッドを本体からはずし、ヘッドとヘッド挿入部の水気をきり、きちんとふいてから再度ヘッドを装着して電源スイッチを押すと、正常に動作します。

【充電の時期について】

- 電池切れの合図は、電源が入っている時にバッテリーランプが点滅するとともに警告音(ピッ、ピッ、ピッ…)が10秒間鳴り、電源が自動的に切れます。
→すぐ充電してください。

【海外でのご使用について】

- 本製品は100-240V電源で使用できます。
- 国や地域により電圧及びプラグ形状が異なる場合があります。
→付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。

⚠ 注意

ご使用になる前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。

必ず交流100-240V電源でご使用ください。交流240Vを超える電源でご使用になりますと、故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえ、ご使用ください。

仕 様	品名	超音波ピーリング	定格時間	10分(自動OFF)
	品番	TE210	充電時間	約5時間
	電源アダプター	AC100-240V 50/60Hz	質量	140g (本体) 175g (ボディ用ヘッド付き)
	電源 本体	ニッケル水素電池 (DC3.6V,800mAh) 1組		
	寸法	高さ184×幅49× 奥行き46mm (ボディ用ヘッド付き)	付属品	ボディ(BODY)用ヘッド フェイス(FACE)用ヘッド 電源アダプター ボディキャップ サブキャップ 世界の電圧とプラグ一覧表



お手入れのしかた

●電源が「OFF」になっていること、電源アダプターが取り外されていることを確認してからお手入れをします。


●本体・ヘッド・スパチュラ部

乾いたやわらかい布で汚れをふき取ります。


●汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取ります。

本体


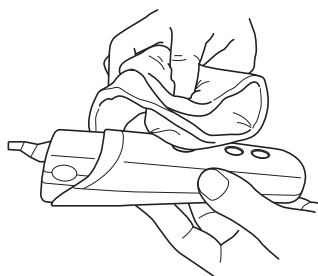


ヘッド

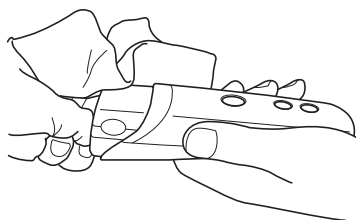

スパチュラ部

ヘッド挿入部は乾いた柔らかい布でふいてください。
※挿入部はぬれた布でふかないでください。

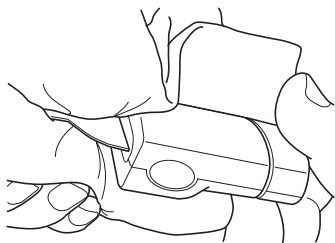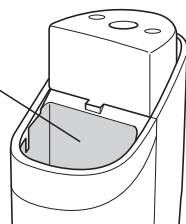

水タンク・水タンクキャップ

水タンクの水を捨て、自然乾燥させてから本体に取り付ける。

ご 注 意

- スイッチは必ず「OFF」にする。誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。
- 本体・ヘッドは水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかない。変形・変色の原因になります。

製品を廃棄するとき




警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

充電式電池のリサイクルにご協力ください。

- 本製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源が使用されています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り外していただき、リサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへのご協力をお願いいたします。
- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。 ニッケル水素電池は、リサイクルへ

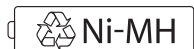


【ニッケル水素電池の外しかた】


この説明は、製品を廃棄するための説明です。(修理をお勧めする説明ではありません)
この製品は、お客様による修理はできません。

- 1** 電源スイッチとミストボタンを、同時に連続10秒以上押してください。「ピッ」と音がしたら押すのをやめ、バッテリーランプが点滅するのを確認してください。
バッテリーランプが消灯するまで放電します。


- 2** ボディキャップ、水タンクカバーと水タンクをはずします。本体背面のゴムキャップ(6個)をはずします。

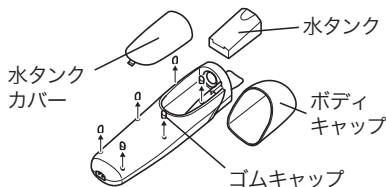


- 3** ネジ(6本)をはずします。

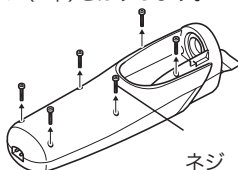

- 4** 本体ケース(正面)と(背面)のすき間に⊖(マイナス)ドライバーを差し込んで本体ケース(背面)をはずします。

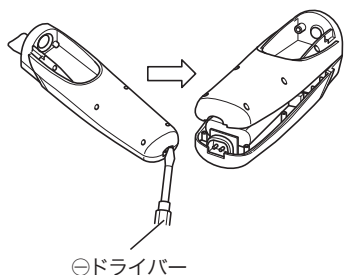

- 5** ニッケル水素電池をつなぐリード線のコネクタを基板から抜き、電池を引き出します。

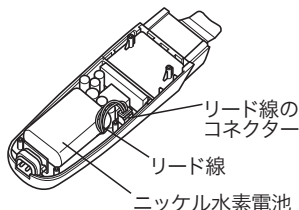

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源スイッチを押しても電源が入らない。	ヘッドを装着していない。	ボディ用ヘッド、フェイス用ヘッドのいずれかを装着してください。
	充電中である。	充電が終了してから電源アダプターを外してください。
	充電切れになっている。	充電してから使用してください。
	安全装置が働いている。	13ページ【安全装置について】をお読みください。
動作中に電源が切れた。		
ミストが出ない。	水タンクに水が入っていない。	水タンクに水を入れてください。
	ミストボタンを押していない。	ミストボタンを押す。その間、ミストが出ます。
	水タンクをきちんとセットしていない。	水タンクを外し、セットしなおしてください。
スパチュラが振動しない。	充電切れになっている。	充電してから使用してください。
	ミストボタンを押している。	ミストボタンを離してください。
	ヘッドをきちんと挿入していない。	ヘッドを外して挿入しなおしてください。
	故障している。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、充電ランプが点いたり、点かなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」に、ご相談ください。(→18ページ)
その他の異常・故障がある。		
充電できない。(バッテリーランプは点灯する)	ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	
充電できない。(バッテリーランプが点灯しない)	電源アダプターの取り付け方が悪い。	電源アダプターを本体とコンセントにしっかり取り付けてください。
	電源アダプターが故障している。	「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→18ページ)
充電してもすぐに使えなくなる。	残量が多く残っていたのに充電をしていた。(継ぎ足し充電)	残量電池を使い切ってから充電する。
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因があります。最寄の電気店にご相談ください。



Q&A

Q1.HI/LOWの切替はどうやって決めるのですか？

- 敏感肌の場合はLOWモードで使用してください。その他の場合も使い始めはLOWモードの設定で使用時間を短くしてご使用ください。

Q2.1日に何回使えますか？

- お肌のお手入れは、1日1回まで、1回10分以内です。週1～2回を目安としてください。
- 使いすぎると肌へ負担がかかります。

Q3.何故ピーリングをする箇所を水でぬらすのですか？

- 超音波を直接肌に伝えるためです。
- 乾いた肌に使用することは絶対にしないでください。

Q4.お風呂場で使っても大丈夫ですか？

- 浴室での使用は可能ですが、浴槽の中で使用しないでください。
- 水の中に落としたり、ヘッド交換の時ヘッド挿入部に水が入らないように注意してください。故障の原因になります。

Q5.水タンクに水ではなく、他の液体を入れても大丈夫ですか？

- 水道水・精製水以外のものを入れないでください。
- 他の液体を水タンクに入れると故障の原因になります。

Q6.ボディ用ヘッドを顔に、フェイス用ヘッドを体に使用しても良いですか？

- 使用しないでください。
- 肌トラブルの原因になります。

Q7.化粧の上から使っても大丈夫ですか？

- 化粧を落としてからお使いください。

Q8.その他のトラブル、どうすればよいですか？

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(18ページ)にご相談ください。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用の超音波ピーリングの点検を！』

- ご使用前に必ずスパチュラの先端に損傷がないかをご確認ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品 名	超音波ピーリング	品 番	TE210	保証対象	本体+ヘッド (フェイス用/ボディ用)
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市和田4217-1