

フットマッサージャー

品番：TF1100

添付文書


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書
を必ずお読みいただき、正しくご使
用ください。

お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られるところに必
ず保管してください。

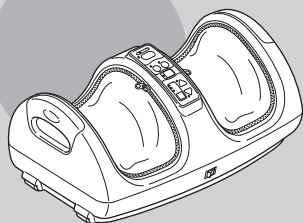

もくじ



安全上のご注意 1～4
各部のなまえとはたらき 5～6



使いかた 7～10



お手入れのしかた 11



仕様 12



故障かな？と思ったら 13



アフターサービス 14
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠警告



次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人

症状悪化・けが・事故の恐れがあります。



必ず守る

本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分に注意を払う。
また、長時間触れないよう、ヒーター使用は1回15分以内とする。

比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどの原因になります。

万一、水ぶくれができたり、赤みや痛みが消えないときは、医師に相談してください。
特に、お年寄り・皮膚の弱い人・皮膚感覚の弱い人・糖尿病などによる血行障害のある人・感覚がにぶくなっている人が使うときは、注意してください。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、必ず医師に相談の上、使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠中または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 上記以外に特に身体に異常を感じている人

事故・体調不良・けがの恐れがあります。



必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや、使用しても効果が現れない場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談する。


事故や体調不良をおこす恐れがあります。

使用前に、必ずクッションカバー・内布が破れていないか確認する。
(どんなに小さくても、破れている場合はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて修理を依頼する。)

感電・けがの恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

火災・感電の恐れがあります。

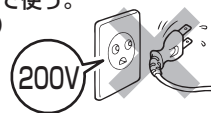

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発熱による火災や感電の恐れがあります。

電源プラグのほこり等は定期的に取り除く。
(ほこりはかわいた布でふき取る。)

湿気により絶縁不良を起こし、火災の原因となります。



電源プラグを抜く

使用後、お手入れ、クッションカバー交換時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておく。

火災・感電・けがの恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。



禁止

クッションカバーを外して使わない。
内部構造が露出した状態では絶対に使わない。


けがの恐れがあります。



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

火災の恐れがあります。

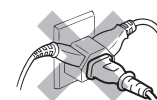

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない
- 本体背面のフック以外には巻き付けない

火災・感電・やけど・ショートがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショートがあります。

足部・ふくらはぎ部以外には使わない。
頭部・首・胸部・腹部や関節部(ひじやひざなど)には使わない。

けが・事故の恐れがあります。



もみ部と本体ケースのすき間に手や足を入れない。

けが・事故の恐れがあります。



安全上のご注意



禁止

子供に使わせない。
使用中は子供を近づけない。
また、本体の上や本体
の周辺で遊ばせない。

けが・事故の恐れ
があります。



梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しを
しない。

感電の恐れがあります。

身体がぬれた状態で本製品を使わない。

感電・事故の恐れがあります。



分解禁止

本製品の改造・分解・修理は
絶対にしない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

注意



必ず守る

使用前に、スイッチやタイマーなどが正
常に動作することを確認する。
長期間使用しなかったときは、取扱説明
書をもう一度読み、本製品が正常に動作
することを確認してから使う。

けが・事故の恐れがあります。

本製品でのマッサージは1回10分以内
とし、1日に2回までとする。
また同じ部位に使う場合は、30分以上
あけて使用する。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激とな
る恐れがあります。



必ず守る

平らで滑りにくい場所で使う。
事故・けがの恐れがあります。

本製品を持ち運ぶときは、必ず取っ手
を持つ。
キャスターで移動させるときは、周囲や
脚などにぶつけないよう注意しながら、
ゆっくり移動させる。（7ページ参照）

けが・破損・床面が傷つく恐れが
あります。

動かなくなったり異常を感じたときは、
ただちに使用を中止し、電源プラグを
抜いて、お買い上げ販売店に相談する。

使用中停電になったときは、ただちに
電源スイッチを切り、電源プラグを抜く。

通電が再開したときに、けが・事故の
恐れがあります。



禁止

他の治療器と同時に使わない。

気分が悪くなったり、体調不良を起こす
恐れがあります。

食後すぐや飲酒後に使わない。

体調不良・けがの恐れがあります。

使用中に眠らない。

けが・事故の恐れがあります。

使用中に本体に足を入れた状態で立ち上
がらない。動作中に足を抜いたり入れた
りしない。

けが・事故・故障の恐れがあります。

本体の上に立ったり、座ったり、本体を
踏み台にしたりしない。

けが・故障の原因になります。



禁止

キャスター付きイス・回転イスなどに
座って使わない。
寝たり、横たわったりした姿勢で
使わない。

けがの恐れがあります。

足に装飾品（アンクレット、指輪など）
を付けたまま使わない。

けが・故障の恐れがあります。

動作中に移動させない。

けがの恐れがあります。

動作中の各部に故意に力を加えて
無理やり止めない。

けが・故障の恐れがあります。


本体を落したり、強い衝撃を与えない。
破損したら使用しない。

故障・けが・事故の
恐れがあります。



ストーブなどの熱源の近くや、ホット
カーペットなどの暖房器具の上で
使わない。

火災・故障・変形の
原因となります。

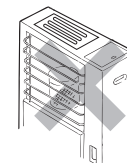

ふとんや毛布などをかぶせて使わない。
コタツやふとんの中などで使わない。


火災・事故・故障の恐れがあります。



禁止

肌の弱い人は素足で使用しない。
けがなどの恐れがあります。

たてに置かない。
転倒による事故・
けが・破損の恐れ
があります。

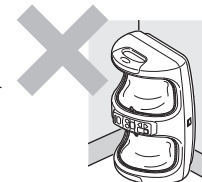

ベンジンやシンナーでふいたり、
殺虫剤などを本体にかけない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

クッションカバーや内布を強く引っ張ら
ない。刃物や鋭利なもので突き刺したり
しない。

けが・故障・破損の原因になります。


本製品は家庭用なので、
業務用として使わない。



水ぬれ禁止

本体に水などをかけない。
ぬらさない。
水に浸けない。

感電・故障の恐れが
あります。

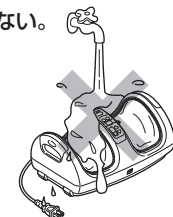

水場禁止

浴室など水のかかりやすい場所や湿気の
多い場所で使わない。

感電・故障の恐れがあります。

保管の際は、湿気が少ない場所に
保管する。

※安全上のご注意のイラストは
実際の商品とは異なります。




各部のなまえとはたらき


「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。
テスコム製品取扱店へお問い合わせください。（14ページ参照）
ホームページでもご購入いただけます。

URL <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

本体

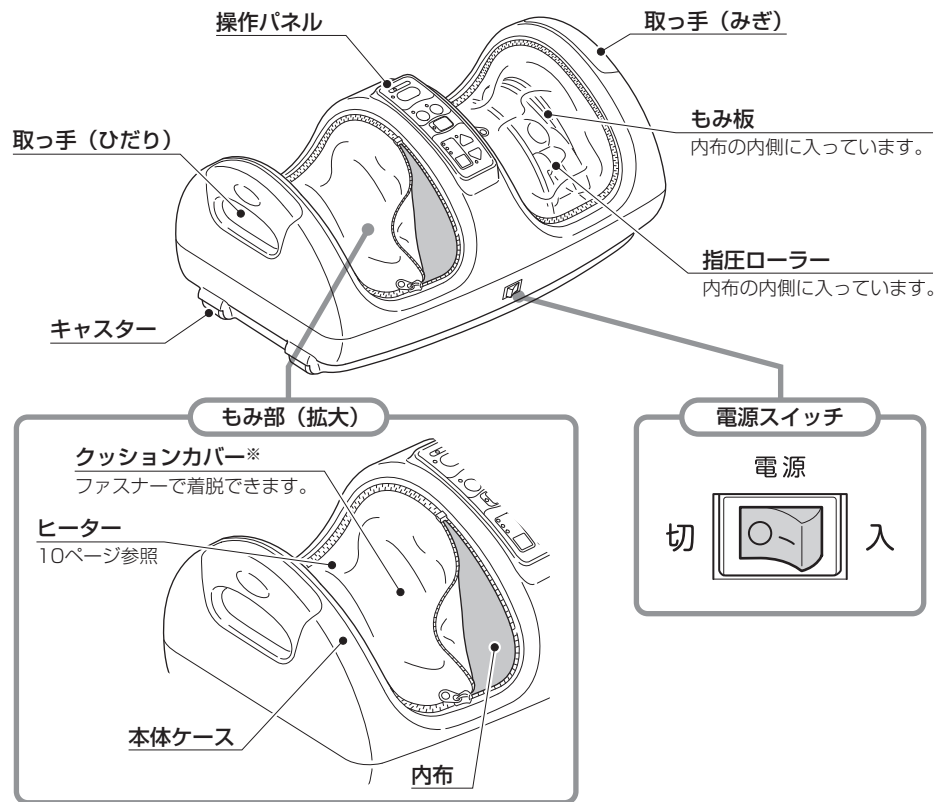


本体 背面

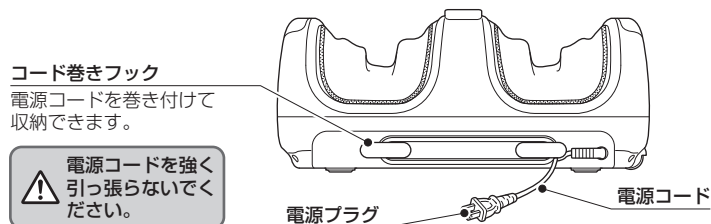

各部のなまえとはたらき

操作パネル

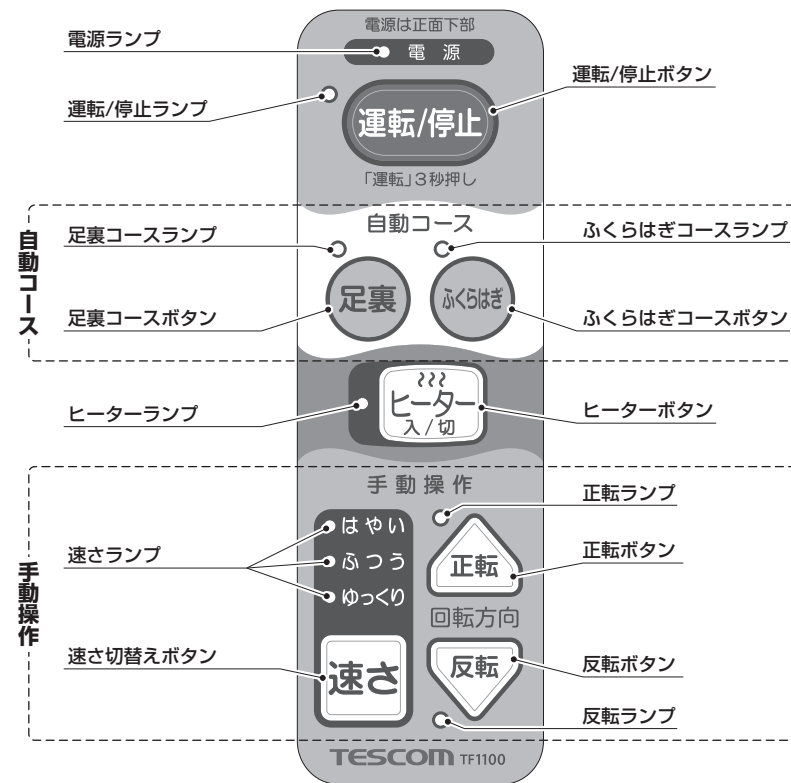

- 自動コース：部位に合った速さと回転方向でマッサージします。
- ヒーター：足先を温めながらマッサージができます。※温熱治療効果はありません。
- 手動操作：お好みで速さと回転方向を選べます。

安全装置について

本製品は、過大な負荷や長時間の連続使用によって内部温度が上昇した場合、製品の故障を防ぐために、「ピー」と5回鳴りながらすべてのランプが点滅して自動停止します。その場合は、電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上休ませてください。



使いかた

使いかた

ご注意

- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さない。故障の原因となります。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離して使う。また、同じコンセントを使用しない。雑音などが入ることがあります。

使用前の準備

1 必ず内布・クッションカバーが破れていないか確認する。



どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止して修理を依頼（クッションカバー破損の場合は別売りのカバーと交換）してください。そのまま使用すると、感電・けがの恐れがあります。

2 本体を安定した場所に置く。

- 床面の傷防止や動作音をやわらげるため、マットなどを下に敷くことをおすすめします。

本体の運びかた

※本体を移動させるときは、電源コードをコード巻きフックに巻き付けてください。
※周囲の人やペット、物などにぶつからないよう注意し、置くときはゆっくり下ろしてください。


<持ち運び>

取っ手を両手でしっかりとつかんで運びます。



<キャスターを使った移動>

取っ手（みぎ）をしっかりつかんで持ち上げ（35cm以下）、ゆっくり移動させてください。（スムーズに移動できない場合は、持って運びます。）

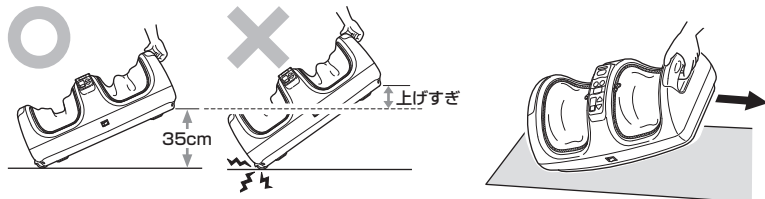





- 高く持ち上げると本体が床に当たるので、床面に傷がつくことがあります。

3 コード巻きフックに巻き付けてある電源コードを、すべてほどく。

使いかた

1 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

電源コードの根元が折れ曲がらないように、注意してください。

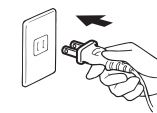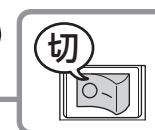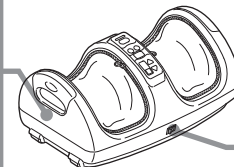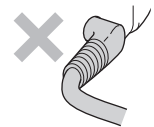

2 電源スイッチを「入」にする。

- “ピー”と音が出てすべてのランプが点滅し、もみ板と指圧ローラーが少し動きます。電源ランプは点灯します。




3 もみ部に足を入れる。

- もみ板・指圧ローラーの感触を和らげたい場合は、靴下を着用したりタオルなどをあてて調節してください。

<足裏と足側面をマッサージするとき>


イスに座り、足をもみ板の間に入れます。

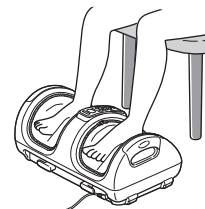

- ツボが集中する足裏を刺激することで血行を促進し、疲労を回復させます。

<足首からふくらはぎをマッサージするとき>


床に座り、足首をもみ板の間に入れます。

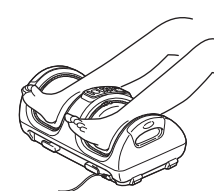

- 足首からふくらはぎをマッサージして筋肉の痛み・だるさをもみほぐします。

<ふくらはぎをマッサージするとき>

床に座り、ふくらはぎをもみ板の間に入れます。

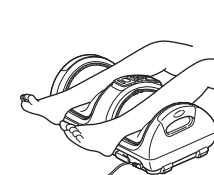

- ふくらはぎの血行を促進し、むくみ・だるさをやわらげます。



肌の弱い人は素足で使わない。
キャスター付きイス・回転イスなどに座って使わない。
寝たり、横たわったりした姿勢で使わない。
けがの恐れがあります。

4 運転/停止ボタンを長押し（約3秒）する。

- 運転/停止ランプが点灯します。

運転を途中で止めるときや、身体に異常を感じたり非常事態が起こったときは、もう一度運転/停止ボタンを押してください。
足が外れるように、もみ板が開いた状態まで動いてから停止します。



5 手動操作「ゆっくり」－「正転」で運転が始まるので、お好みで変更する。

- マッサージ開始から約10分でタイマーが働いて停止します。
- 途中で「ピー」と鳴って停止したときは、安全装置が働いています。6ページ『安全装置について』をご覧ください。



! 本製品でのマッサージは1回10分以内、1日2回までとする。
また、同じ部位に使う場合は30分以上あける。
筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故や体調不良をおこす恐れがあります。

<手動操作でマッサージを続ける場合>

速度と回転方向を変更できます。

押すたびに、速度が変わります。

- 選択した速さのランプが点灯します。

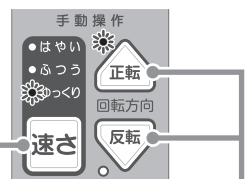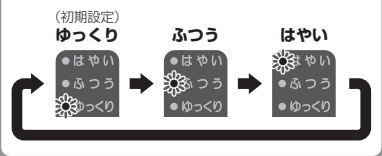

回転方向を選べます。

- 選択中の回転方向ランプが点灯します。



<自動コースに変更する場合>

自動コースに変更すると、手動操作はできなくなります。

足裏コースボタン、またはふくらはぎコースボタンを押してください。

足裏コースは、足裏に適した、やさしい刺激でリラックス効果のあるコースです。

- 選択中は、足裏コースランプが点灯します。




ふくらはぎコースは、ふくらはぎや足首に適した、しっかりとみほぐすコースです。

- 選択中は、ふくらはぎコースランプが点灯します。

<ヒーターを使う場合>

ヒーターボタンを押してください。

- ヒーターランプが点灯します。
- もう一度押すとヒーターが切れます。

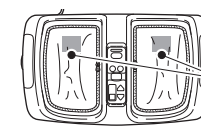


この部分が温かくなります。
(温まるまで5分程度かかります。)


※ヒーターはマッサージ開始前やマッサージ中でも入/切の操作ができます。

※ヒーターは使用開始から約15分でタイマーが働いて切れます。ヒーターのタイマーの残り時間があっても、マッサージが停止すると同時にヒーターも切れます。

例：マッサージ・ヒーターがタイマーで停止した

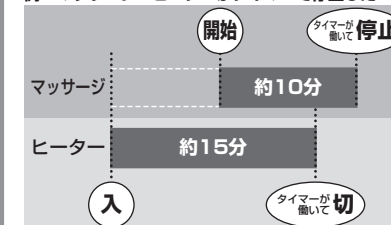


例：ヒーターを手動で停止した

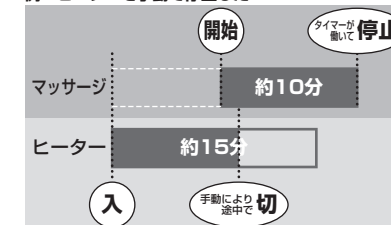


ヒーターのタイマーが先に切れても、マッサージは止まりません。

※タイマーが切れたヒーターを再度入れないでください。低温やけどの恐れがあります。

例：マッサージがタイマーで停止した

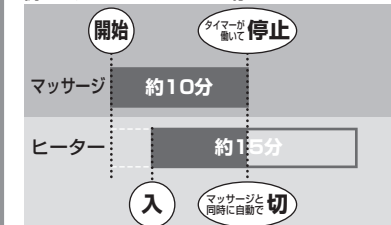

例：マッサージを手動で停止した

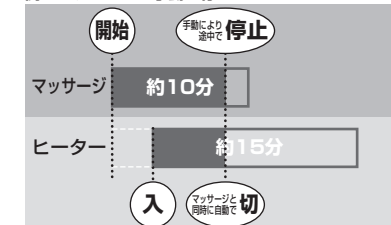


マッサージのタイマーが切れるか、途中で運転を止めると、ヒーターも切れます。

! ヒーターを連続で使用しない。
比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどの原因になります。

6 マッサージが終わったら、電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。

- 使用後は、陽のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをし、ホコリがつかないように布などのカバーをかけて保管してください。

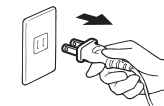



お手入れのしかた

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。


本 体

乾いたやわらかい布でふき取る。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石け
ん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よ
くしぼって汚れをふき取ってから、やわらか
い布でからびきする。



クッションカバー

クッションカバーはブラシをかけて、やわら
かい布に水または水で薄めた中性洗剤をふく
ませ、よくしぼってからふき取り、乾燥させ
る。

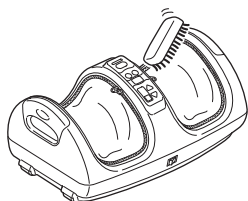


クッションカバーの汚れが気になるとき

クッションカバーの汚れが気になるときは、本体から取り外して手洗いしてください。

● 内布は取り外しできません。

- 1 ファスナーを開けて、クッションカバーを
本体から取り外す。
- 2 漂白成分の入っていない中性洗剤を使い、
やさしく押し洗います。
- 3 よくすすいでから、軽く押す程度に水を切る。
- 4 陰干しで十分に乾燥させる。
- 5 完全に乾いてから、取り外しの逆の手順で
本体に取り付ける。

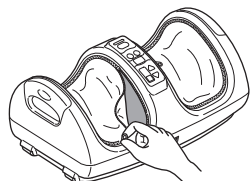

● クッションカバーに左用/右用はありません。

ご 注 意

- 本体を水に浸けたり、水をかけたりしない。
- ペンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、
漂白剤などを汚れ落としとして使わない。
- クッションカバーは、他のものと一緒に洗わない。
色落ちする場合があります。
- クッションカバーを乾燥機にかけない。



仕 様

中国製

販 売 名	フットマッサージャー TF1100	種 別	機械器具 77 バイブレーター
電 源	AC100V 50/60Hz	一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
定格消費電力	40W	医療機器分類	管理医療機器
電動機消費電力	33W	医療機器認証番号	228AKBZX00078000
電熱器消費電力	7W	製造販売元	テスコム電機株式会社 長野県松本市和田4217-1
定 格 時 間	20分	製 造 元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
内蔵タイマー	マッサージ 約10分 ヒーター 約15分	材 質	本体：ABS樹脂 クッションカバー：ポリエステル
質 量	5.6kg		
電源コード長さ	1.8m		
寸 法	高さ224×幅499×奥行き321 (mm)		
も み 回 数	28回/分 (ゆっくり) 38回/分 (ふつう) 48回/分 (はやい)		
たたき回数	84回/分 (ゆっくり) 114回/分 (ふつう) 144回/分 (はやい)		
使 用 目 的 または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 ● 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解		

廃棄について

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(14ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。 動かない。	●電源プラグが抜けている。 ●電源スイッチが入っていない。 ●運転/停止ボタンを長押ししていない。 ●電源コードが断線している。	●電源プラグを確実に差し込む。 ●電源スイッチを入れる。 ●運転/停止ボタンを3秒間押す。 ●ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(14ページ参照)
ヒーターが温まらない。	●ヒーター使用開始から時間がたっていない。 ●ヒーター使用開始から15分以上経っている。(自動で切れた)	●ヒーターが温まるまで時間がかかります。 ●故障ではありません。 ※使用時間は、1回15分以内にしてください。
停止してしまった。	●運転開始から10分以上経っている。(自動停止した) ●安全装置が働いた。	●故障ではありません。 ※使用時間は、1回10分以内にしてください。 ●6ページ「安全装置について」の手順で復帰させてください。
マッサージ中の音が 気になる。	構造上、以下の音が出ることがありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・クッションカバーのこすれる音 ・指圧ローラーの回転音 ・正転・反転の動作音の違い・負荷をかけたときの音	
クッションカバーが破れた。	ただちに使用を中止し、専用のクッションカバーと交換してください。別売品のお取り寄せについては、お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。 (14ページ参照)	
内布が破れた。	ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (14ページ参照) ※本製品の分解・修理は絶対にしないでください。	
煙が出る。		
電源コードが破損した。 本体が破損した。		



アフターサービス

1.保証書について ———— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



●長年ご使用のフットマッサージャーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	TF1100	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年	月 日
	ご住所 (〒)		★販売店 住所・店名		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1