

# エアーフットマッサージャー

## TF2000


### 取扱説明書

#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

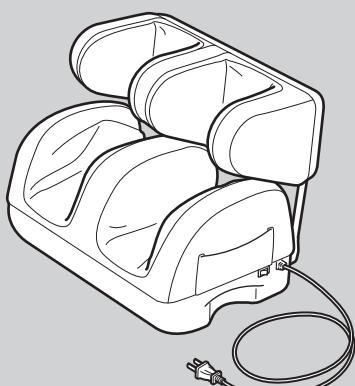

#### もくじ



安全上のご注意 ..... 1・2・3  
各部のなまえとはたらき ..... 4・5



使いかた ..... 6・7




お手入れのしかた ..... 8



故障かな?と思ったら ..... 9  
仕様 ..... 9



アフターサービスについて ..... 10  
保証書 ..... 裏表紙

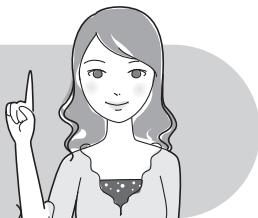

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告



### 次の人はは使用しない。

- ・医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓症（血栓・重度の動脈瘤（りゅう）・急性静脈瘤（りゅう）・各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症をふくむ）など



### 次の人はは、使用前に医師に相談してください。

必ず守る

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・施療部位に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温38℃以上（有熱期）の人  
例：急性炎症症状（けん炎症・悪寒・血圧変動など）の強い時期・衰弱している時
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折・急性疼（とう）痛性疾患の人
- ・捻挫、肉ばなれなど炎症性疾患の人

体調不良・けがをする恐れがあります。



### 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談する。

必ず守る

マッサージは1回15分以内とする。続けてお使いになる場合は、30分以上あけて使う。  
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となる恐れがあります。



### 体がぬれたままの状態では、絶対に使わない。

ぬれ手禁止

感電・故障の恐れがあります。



本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしない。また、お風呂場などの水のかかりやすい場所での使用・保管はしない。

水場禁止

感電・故障の恐れがあります。



### 本製品やリモコンなどの改造・分解・修理は絶対にしない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。

# 安全上のご注意

## △ 注意



禁 止

電源コードが破損する恐れのあるような使いかたをしない。

感電・ショート・発火の恐れがあります。

交流100V以外では使わない。  
また、たこ足配線はしない。

漏電・火災の恐れがあります。


子どもに使わせたり、本体の上で遊ばせたり、座ったりさせない。

事故・けがをする恐れがあります。



布カバーが破れた状態で使わない。

故障・事故・けがをする恐れがあります。

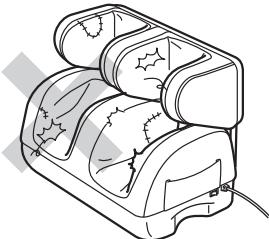


他の治療器との併用はしない。

けが・体調不良・事故の恐れがあります。

足部・ふくらはぎ部のマッサージ以外で使わない。

故障・けがをする恐れがあります。

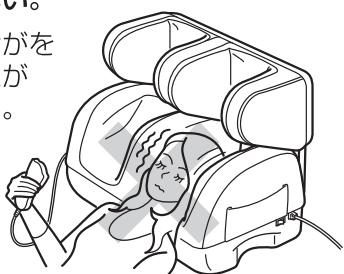

必ず守る

使用中に頭痛を感じたり、具合が悪くなったり、身体に異常を感じたらすぐに使用を中止する。

体調不良・けがをする恐れがあります。

本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使う。

火災・感電・けがの恐れがあります。

本製品を使用する前には、電源スイッチ・リモコンが正常に作動するか確認する。

火災・感電の恐れがあります。

使用中停電になった時は、直ちに電源スイッチを切る。

火災・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。



電源プラグ  
を抜く

ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

漏電・火災や感電の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う。

火災・感電の恐れがあります。

コンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。



禁 止

食後すぐに使わない。

けが・体調不良の恐れがあります。

電源コードおよびリモコンの上に重い物を載せたり、落としたり、コード類を本体の下敷きまたは足にコード類をはさまない。

火災・感電の恐れがあります。

## ⚠ 注意



禁 止

電源コードを無理に折り曲げたり、  
継ぎ足したりしない。

火災の恐れがあります。



禁 止

電源プラグはコンセントに確実に  
差し込み、たこ足配線はしない。

ショートの恐れがあります。

リモコンに衝撃を与えたる、落下させない。  
誤動作や故障の原因になります。

本製品を踏み台にしたり、重い物を載せない。  
けがをする恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し  
込みがゆるい時には使わない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

可燃物や火気の近くでは使わない。  
変形・故障・発火するおそれがあります。


動作中の各部に故意に力を加えて  
無理やり止めない。

機械油などの油成分が浮遊している場所  
および化学薬品などの成分が浮遊している  
場所では使わない。

故障・けがをする恐れがあります。

変形・故障・発火するおそれがあります。

ふくらはぎ部をリクライ  
ニングする時は、  
穴に指を入れない。  
けがをする恐れが  
あります。

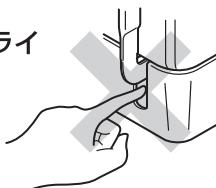

本製品は一般家庭用なので、業務用とし  
て使わない。

ベンジンやシンナーで拭いたり、  
殺虫剤などを本体にかけない。  
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

ご使用中子どもをそばに近づけない。  
事故・けがをする恐れがあります。

自分で意思表示のできない人や、身体の  
不自由な人には使わせない。  
体調不良・けがをする恐れがあります。

## ご 注意

- 使用前・使用中、本製品に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、弊社お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 本製品をしばらく使用せず、再度使用する時は、必ずすべての機能が正しく動作することを確認してからお使いください。(5ページ参照)  
異常があった場合は、販売店にご相談ください。
- 使用中に異臭・異常な高温・煙を出したり・その他通常と異なる変化が認められた場合、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- カーペットなどの上で使用されると、本製品の底面が結露する場合があります。性能について問題はありませんが、その場合は乾いた布で拭き取ってください。




# 各部のなまえとはたらき...


## <本体>

### 収納ポケット(右)

リモコンが  
収納できます。

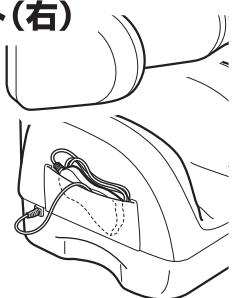

### 足部 エアーバッグ

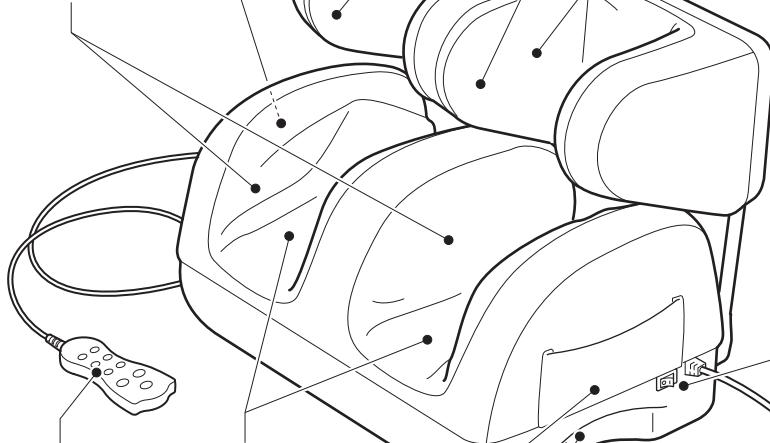


### リモコン

5ページ参照

### 足裏部 エアーバッグ

### 収納ポケット(左)

電源コードが  
収納できます。

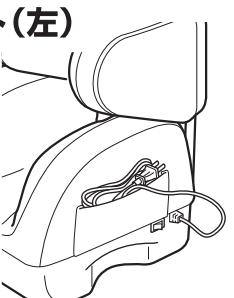


### 布カバー

エアーバッグの全てに  
かけられています。  
取り外しできません。

### ふくらはぎ部 エアーバッグ

#### 本体背面

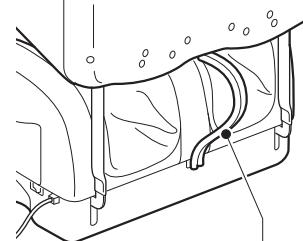

### エアーホース

### 電源スイッチ



OFF      ON

### 電源プラグ

### 取っ手

持ち運びする時は  
この部分を持ちます。

### 電源コード

# 各部のなまえとはたらき

## < リモコン >

### 電源ランプ


電源スイッチが入ると点灯します。

### 自動モード

足・ふくらはぎコースボタン  
足部・足裏部・ふくらはぎ部のエアーマッサージが自動で始まり、約15分で切れます。

### 強さ調節ボタン

マッサージの強さを3段階で設定できます。  
※自動モード・手動モードのどちらでも調節できます。

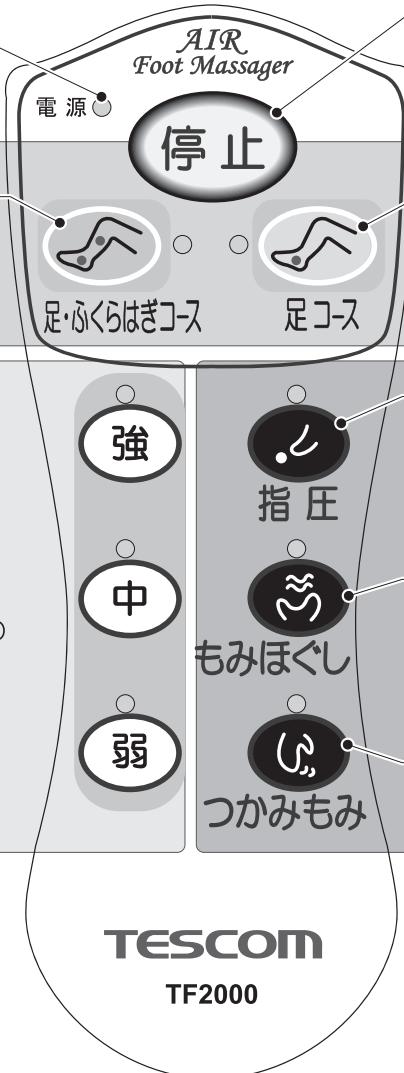

### 停止ボタン

停止状態になります。

### 足コースボタン

足部・足裏部のエアーマッサージが自動で始まり、約15分で切れます。

### 指圧ボタン

足部を包み込みながら、足裏のツボを同時に押し上げマッサージを繰り返します。

### もみほぐしボタン

足部を包み込みながら、足裏のツボを不連続に押し上げマッサージを繰り返します。

### つかみもみボタン


エアーブロー量・押さえ込み時間が最大で、ふくらはぎ部⇒足部⇒足裏の順番でマッサージを繰り返します。

### 手動モード

最後に操作してから約15分で切れます。

## ご注意


- 主電源を切る時は停止ボタンではなく、本体の電源スイッチでお切りください。
- 足(足部)とは、足首および甲部分で、足裏(足裏部)とは、土踏まずおよびかかと部分を指します。
- 動作中はそれぞれ動作中のランプが点灯します。
- 手動モードは、操作によっては15分以上になる場合がありますが、1回15分を超えないようにお使いください。
- リモコンのボタンを2つ以上同時に押さないでください。故障の恐れがあります。

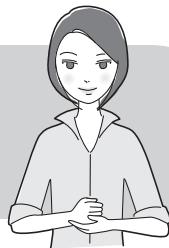

# 使いかた

1


電源プラグをコンセントに差し込みます。  
本体は安定した場所に置いてください。

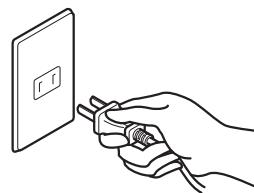

2

電源スイッチをいれます。

電源スイッチは本体左側面にあります。  
リモコンの電源ランプが点灯します。

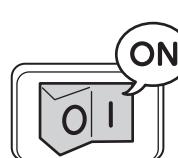


3

足をエアーフットマッサージャーに置きます。

イスなどに座り、下のイラストのように足を置きます。  
ふくらはぎ部は、リクライニング・高さをお好みの場所に調節してください。


## ●高さ調節機能(3段階)

ふくらはぎの高さに合わせて手動でスライド調節できます。調節の際は下図のように足を入れた状態で、ふくらはぎ部の両端を両手で持って合わせます。

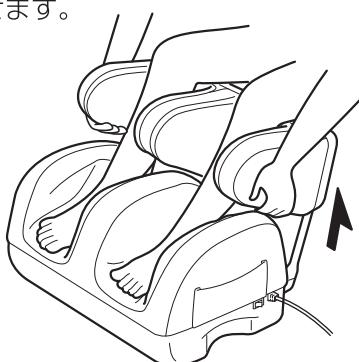


## ●リクライニング

座っているイスに合わせて角度を調節できます。  
本製品から足をはずすと元の位置に戻ります。

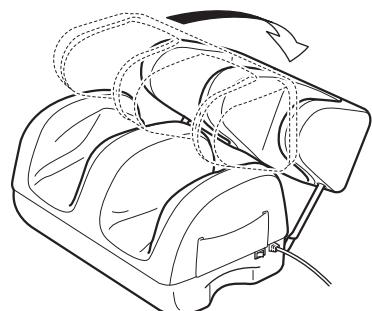

## リクライニングのご注意

- パイプの角で床やカーペットなどを傷つけないよう、ご注意ください。
- パイプ穴に指を入れないでください。  
けがをする恐れがあります。
- パイプと本体のすき間に指をはさまないように注意してください。  
けがをする恐れがあります。

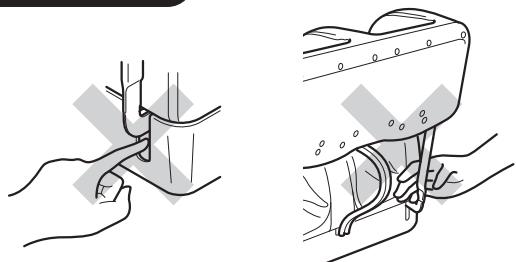

## 4 リモコンのボタンを押します。


リモコンでコース・強さを選びます。

(5ページ参照)


止めるときは停止を押します。



床に座って使用しないでください。

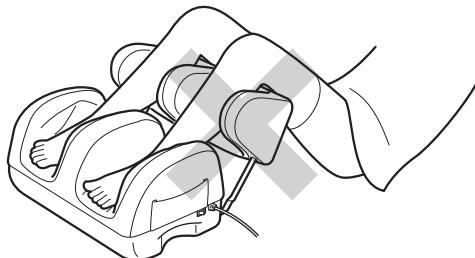


足を反対側から入れて使用しないでください。

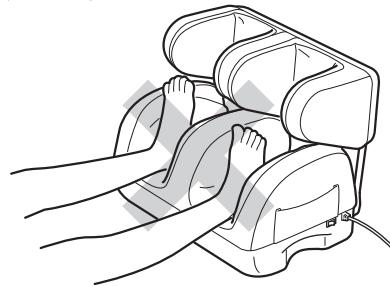

## 5 電源スイッチを切ります。

コンセントから電源プラグを抜いてください。

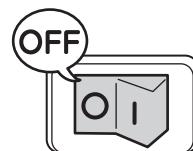

### ご注意

- マッサージは1回15分以内にしてください。続けてお使いの場合は30分以上間隔をあけてお使いください。
- 布カバーが破れた状態で使わないでください。
- 本体の裏側にあるエアーホースをつぶさないようご使用ください。エアーが送れなくなります。(4ページ参照)
- リクライニングする時は、指をはさんだり、床などに傷をつけないようご注意ください。(6ページ参照)




# お手入れのしかた

本製品を衛生的に保つために、お使いの後は電源スイッチを切り電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

## 布カバー部

ブラシをかけて水または中性洗剤をしみこませてよくしぼった布でよごれを拭き取ってください。  
(布カバーは取り外しできません。)

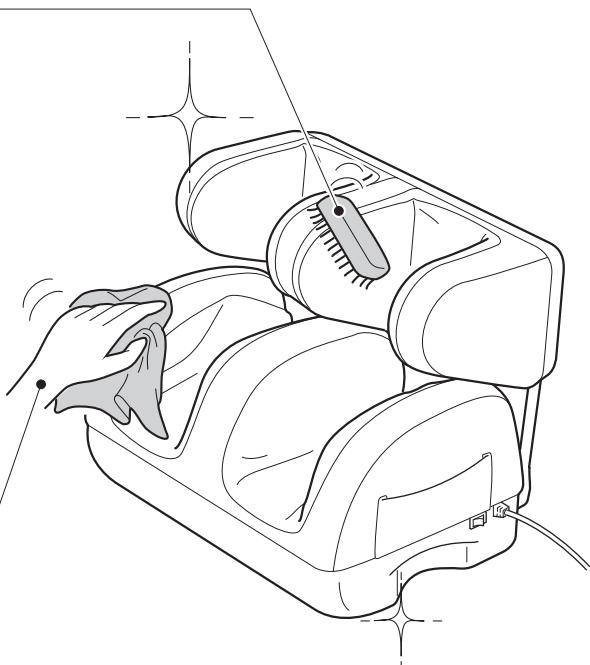

## 本体

乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
よごれのひどい時は水または中性洗剤をしみこませてよくしぼった布で拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。

## ご注意

- 高温・多湿・直射日光の当たる所・ホコリの多い所に保管はしないでください。
- ベンジン・シンナーをよごれ落としとして使わないでください。



# 故障かな？と思ったら

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

## こんなときは

音が気になる。

エアーフットマッサージャー  
構造上の動作音。

## こう処置してください

左記は構造上やむをえず発生するもので機能などに影響ありません。

動かない。

- 電源プラグがはずれている。
- 電源スイッチが入っていない。

- 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 電源スイッチを入れる。

使用中に  
止まった。

タイマーが動き、停止状態になっている。(15分たった。)

30分以上間をあけてから再度操作する。

強弱ボタンを押しても  
強さが変わらない。

強さは強・中・弱の3段階に切替できます。  
どの強さに設定されているか  
ご確認ください。

ボタンを押しても変化しない場合は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

煙がでる。  
電源コードがねじれて  
戻らなくなった。

ただちに使用を中止してください。  
「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

## 仕様

品名	エアーフットマッサージャー TF2000		
コードの長さ	2.0m	一般的名称	家庭用エアー式指圧代用器
消費電力	48W	医療機器製造販売業許可番号	13B2X10003
電源	AC100V 50/60Hz	医療機器認証番号	218AGBZX00001000
寸法(mm)	高さ 460×幅 490 ×奥行 450	本体素材	本体/ABS 外被/ポリウレタン
重量	約 11.3 kg	布カバー	ポリエステル94% ポリウレタン6%
定格時間	15分	タイマー	15分
効果効能	疲労回復 筋肉痛・神経痛の緩和 筋肉疲労をとる 血行の促進		



## 『長年ご使用のエアーフットマッサージャーの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・布カバーに傷などがないか  
お確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書				持込修理	
品名	エアーフットマッサージャー TF2000			保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間			★お買い上げ年月日	年 月 日
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★ 販売店	住所・店名 電話	

株式会社 テスコム

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市筑摩4-1-20