


品番：TF5000

取扱説明書

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

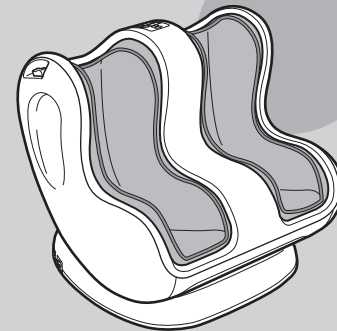A stylized illustration of a woman with long, wavy hair, wearing a light-colored top with a dark, patterned neckline. She is pointing her right index finger upwards. The background is a light gray circle.

安全上のご注意 1~4

各部のなまえと
はたらき 5~6



使いかた 7~10



お手入れのしかた……………11



故障かな?と思ったら12



仕様 13

アフターサービス 14

保証書 裏表紙

こんな症状は
ありませんか

●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●こげくさい臭いがする。
●製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
●その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。


保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 **持込修理**

品番		TF5000	保証期間		お買い上げ年月日より 1年間		保証対象		本体	
★お客様	ご芳名				様	★販売店	★お買い上げ年月日		年 月 日	
	ご住所（〒									

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

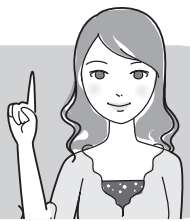

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠警告



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、必ず医師に相談の上、使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強いときや、衰弱しているとき
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 腱鞘(けんしょう)炎の人
- 上記以外に、特に身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこす恐れがあります。



必ず守る

ご使用前には、必ず内布・クッションカバーが破れていないか確認し、破れや外した状態では使用しない。
(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に修理を依頼してください。)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがの恐れがあります。

電源は交流100Vを使用する。

本製品は日本国内専用です。
交流(AC)100V以外の電源を使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品専用の電源コード以外は使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグ・差し込みプラグは容易に外れないように正しく確実に差し込む。
感電や発熱による火災の原因になります。

電源コードを抜くとき、本体から電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグ・差し込みプラグを持って抜く。

コード接続部に無理な力をかけないでください。感電や発火の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。

プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源コードを抜いた状態で、必ず乾いた布で拭いてください。

使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談する。
事故や体調不良をおこす恐れがあります。



電源プラグを抜く

ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁劣化し、感電や漏電火災の原因になります。

安全上のご注意



禁止

次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人。
例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
症状を悪化させる恐れがあります。

自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない。
事故やけがの恐れがあります。

幼児や子供に本体の上や、まわりで遊ばせない。
けがや故障の恐れがあります。

子供に使用させない。
また、使用中は子供を近づけない。
事故やけがの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをするとき口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

足部、ふくらはぎ部以外のマッサージに使用しない。
(特に頭や首には絶対に使用しない)

事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。

クッションカバーを外して使わない。
内部構造が露出した状態では絶対に使わない。
けがの恐れがあります。

使用中に本体に足を入れた状態で立ち上がらない。
事故やけがの恐れがあります。

本体の上に立ったり、座ったり、本体を踏み台にしたりしない。
けがや故障の原因になります。


安全上のご注意



禁止

本体のすき間や、スライド機構部の穴に指を入れない。

けがの恐れがあります。

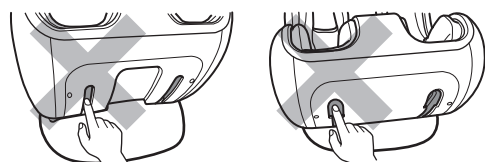

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない。

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- 電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- 電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
- 電源コードを本製品に巻き付けない。
- 電源コードはねじれをほどいて保管する。
- 電源コンセントや配線器具など、たこ足配線などで定格を超える使いかたはしない。



分解禁止

絶対に分解や改造、修理をしない。

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをする恐れがあります。



ぬれ手禁止

身体がぬれた状態で本製品を使用しない。感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

使用中、からだに異常が現れた場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する。

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこす恐れがあります。

本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用を避ける。

同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。

ご使用前には、必ず電源スイッチ、操作ボタン、内蔵タイマーなどが正常に動作するか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

本製品は突起物がなく、平らで滑りにくい安定した場所で使用する。

不安定な場所で使用した場合、使用中に本体が動き出し、事故やけがの恐れがあります。

長期間使用しなかった場合は、使用前に正常にかつ安全に動作するか確認する。

内部部品が劣化している場合、事故やけがの恐れがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

動かなくなったときや、異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お客様による勝手な分解・修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



電源プラグを抜く

停電のときはただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグがコンセントに差し込まれたまま通電が再開した場合、事故やけがの恐れがあります。

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



禁止

他の健康用機器や治療器と同時に使わない。

事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。

使用中に眠らない。

事故やけがの恐れがあります。

足に装飾品（アンクレット、指輪など）を付けたまま使わない。

故障やけがの恐れがあります。

食後および飲酒後は使用しない。

体調不良をおこす恐れがあります。

クッションカバー・内布を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない。

けがや故障、破損の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない。漏電やショート、故障の原因になります。

本体を移動するときは引きずらない。床や畳などを傷つける恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めない。

けがや故障の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない。

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。

火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

直射日光のあたる場所で使用しない。

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。また変形や変質など本体の外装を傷める恐れがあります。

お手入れにベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しない。

変形や変色、変質など本体の外装を痛めるだけでなく、ひび割れによるけがの恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。



水ぬれ禁止


本体や操作部に水などをこぼさない。火災や感電、故障の原因になります。



水場禁止

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない。

火災や感電、故障の原因になります。

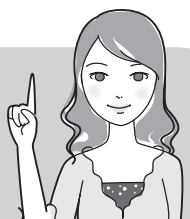


各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることを確かめください。
「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社
「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（14ページ参照）
ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

本 体

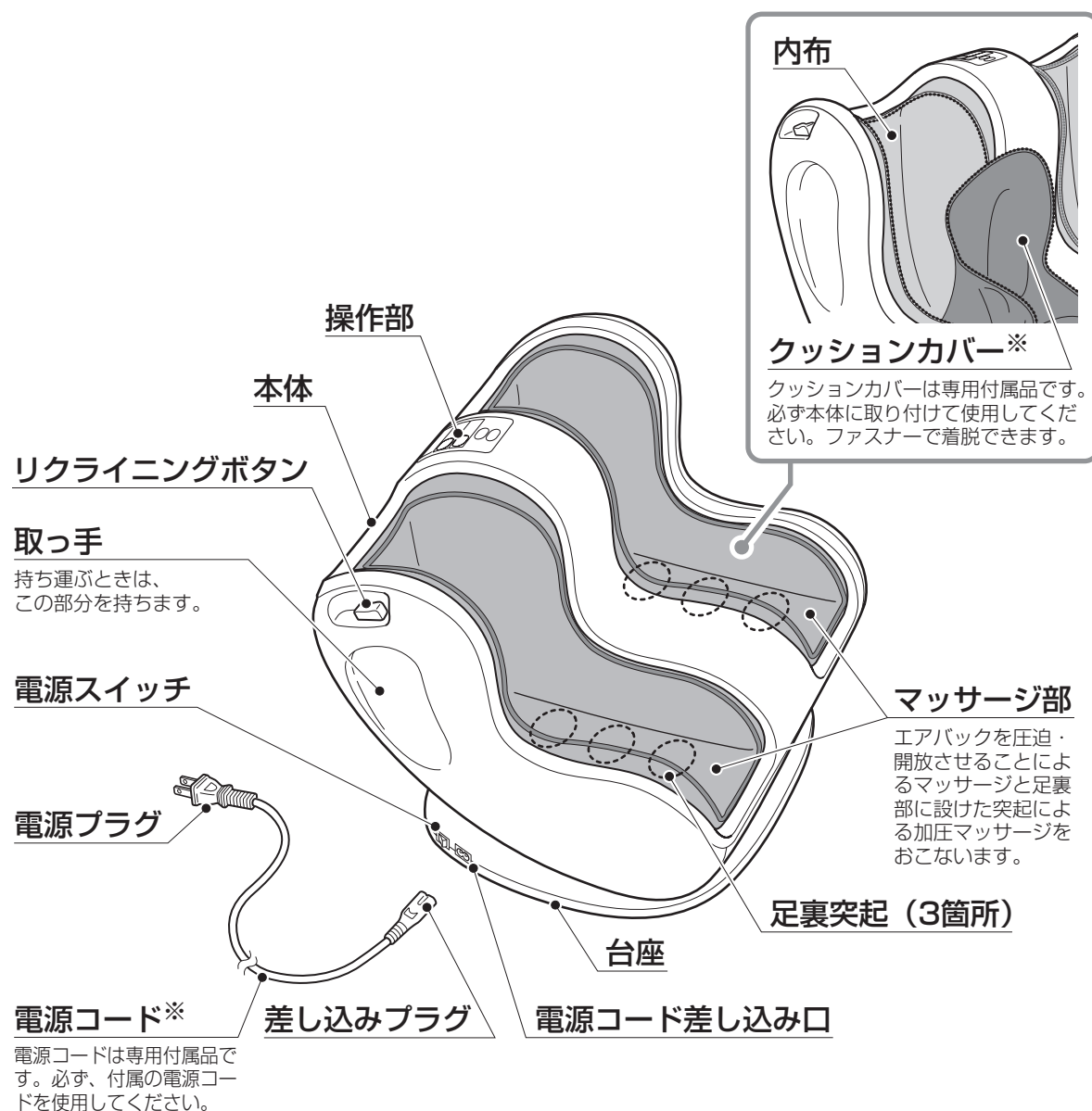


内蔵タイマーについて

最後にコースを選択してから約15分でタイマー機能が働き、自動的に電源が切れます。
※タイマーが働いて電源が切れても、電源スイッチは「入」のままです。必ず「切」にしてから電源プラグを抜いてください。

各部のなまえとはたらき

操作部

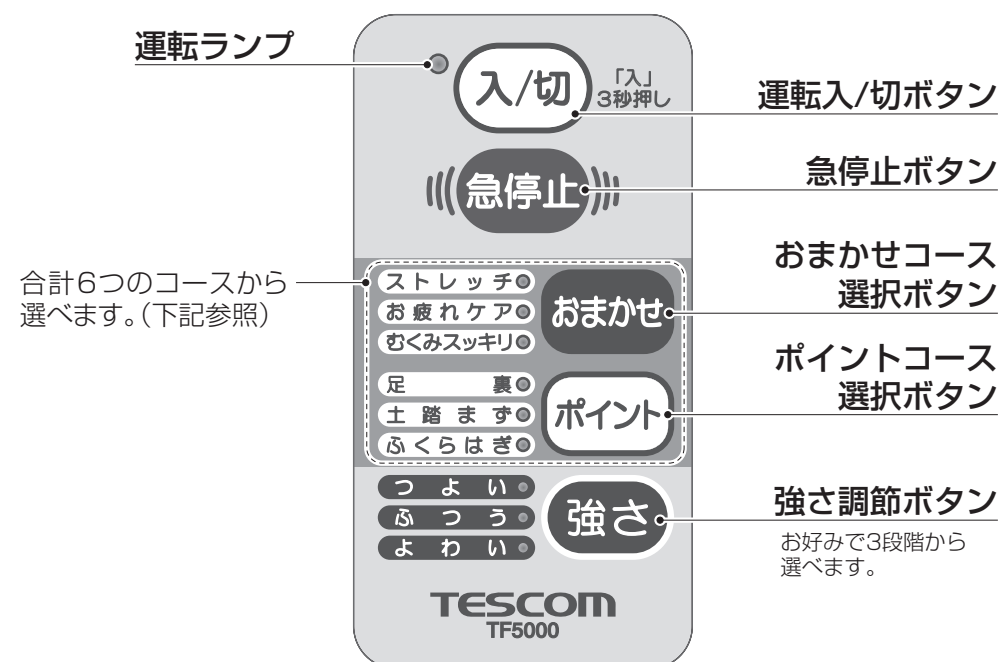


おまかせコース

- ストレッチ**
足全体をもみほぐしながら、横方向と縦方向のアーチを伸ばすコースです。
- お疲れケア**
足全体をしばらくあげる動作で念入りにもみほぐす「もみ中心」で、足の疲労を回復するマッサージコースです。
- むくみスッキリ**
ふくらはぎをもみほぐしながら、足裏を指圧感覚*で刺激するコースです。

ポイントコース

- 足裏**
足裏を指圧感覚*で重点的に刺激するマッサージするコースです。
- 土踏まず**
足の形を理想的な形に近づけるために、縦方向のアーチを伸ばすコースです。
- ふくらはぎ**
ふくらはぎを中心に足首までを重点的にマッサージするコースです。

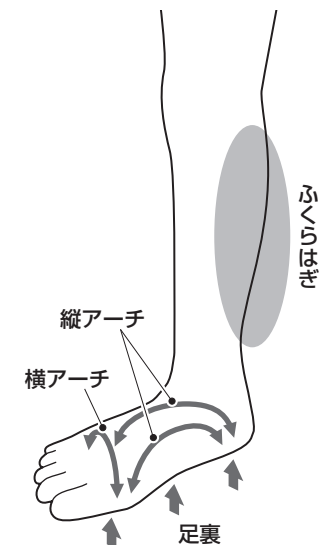

※「指圧」の文言を使用していますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。



使いかた

使いかた

ご 注 意

- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さない。故障の原因となります。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離して使う。また、同じコンセントを使用しない。雑音などが入ることがあります。
- リクライニング操作前に、周囲に人やペットがいないか、ぶつかりそうな物がないか確認する。
- マッサージ部に足を入れていない状態でリクライニング操作しない。リクライニングが急に戻る恐れがあります。

使用目的／効能・効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

使用前の準備

1 必ず内布・クッションカバーが破れていないか確認する。




どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止して修理を依頼（クッションカバー破損の場合は別売りのカバーと交換）してください。そのまま使用すると、感電・けがの恐れがあります。

2 本体を安定した場所に置く。

- 椅子などに座って使える場所に置いてください。
- 床面の傷防止や動作音をやわらげるため、マットなどを下に敷くことをおすすめします。

3 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、

- ① 電源コードを本体と接続してから、
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。

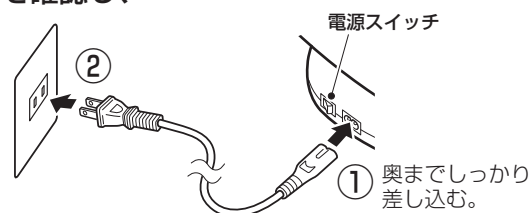

4 電源スイッチを「入」にする。


- 電源コード差し込み口の横にあります。

切 → 入



5 椅子などに座ってマッサージ部に足を入れ、リクライニングボタンを押しながら角度を調節する。


- リクライニングボタンを押しているあいだ、約30°の範囲で動きます。角度が決まったら、リクライニングボタンから指をはなしてください。

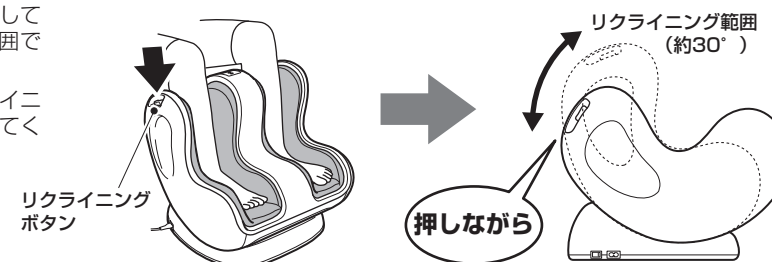


使用例

椅子などに座り、ひざを軽く曲げた状態で使用してください。


- いすに座って使うとき

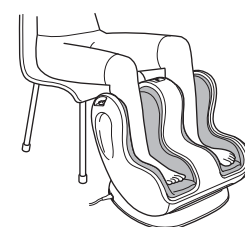



- ソファーに座って使うとき

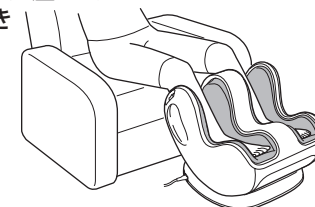

足裏突起のつま先突起が、図のように足指の付け根にあたる位置に足を置いてください。

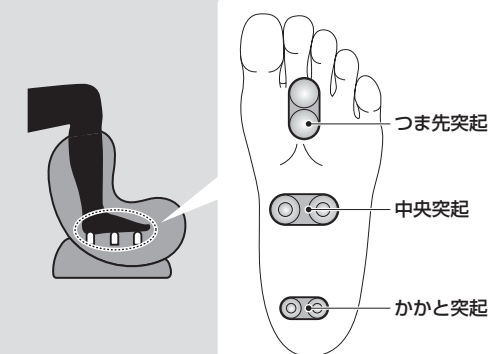

- キャスター付きの椅子に座って使用しない。ケガをする恐れがあります。
- 床に座って使用しない。
- 足を反対側から入れて使用しない。

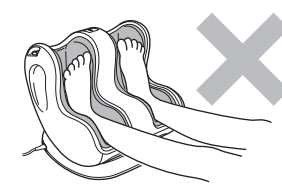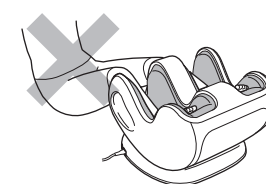

使いかた


1 入/切ボタンを長押し（約3秒）する。

- 運転ランプが赤く点灯します。
- 運転ランプ点灯後、なにも操作しないと5分後に「切」の状態になり、運転ランプが消えます。



2 マッサージのコースを選択する。

- 各コース選択ボタンを押すと、強さ「よわい」でマッサージが始まり、約15分で止まります。
- 途中で止めたいときは、急停止ボタンを押してください。

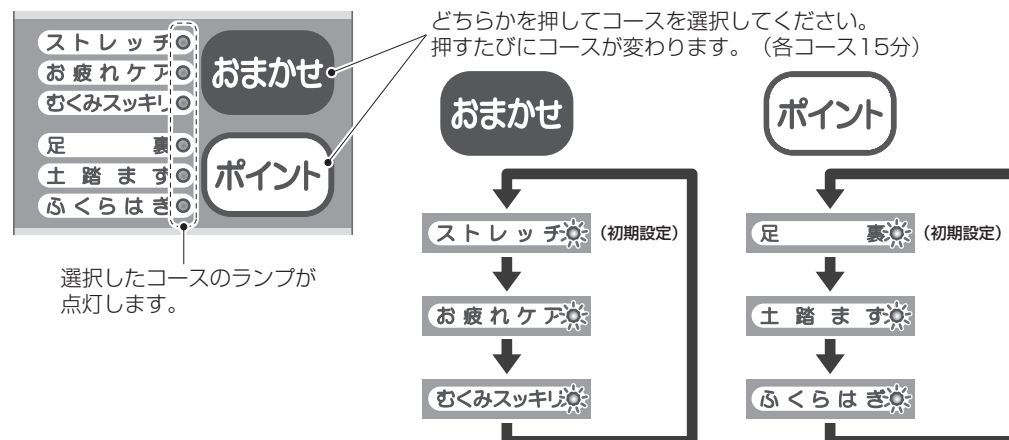

おまかせ

ストレッチ：足全体のもみほぐし+足先ストレッチコース
お疲れケア：足全体をもむコース
むくみスッキリ：ふくらはぎのもみほぐし+足裏刺激コース

ポイント

足裏：足裏刺激コース
土踏まず：土踏まず周辺を伸ばすコース
ふくらはぎ：ふくらはぎマッサージコース


※各コースの詳細は6ページ参照。



本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用はしない。筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故・けが・体調不良を起こす恐れがあります。

3 マッサージの強さを選択する。


- 使い始めはマッサージ強さを「よわい」で使い、弱い刺激からマッサージしてください。

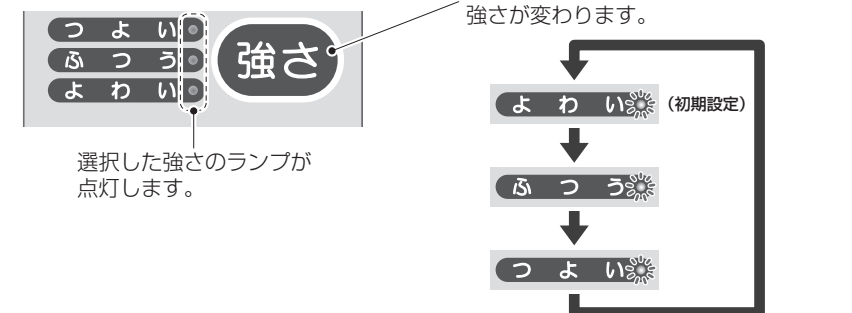


身体に異常を感じたり、非常事態が起こったときは

すぐに急停止ボタンを押してください。その場でマッサージが停止し、すべてのエアーが抜けます。

4 マッサージが終わったら、リクライニングボタンを押しながらリクライニングを戻して足を抜く。

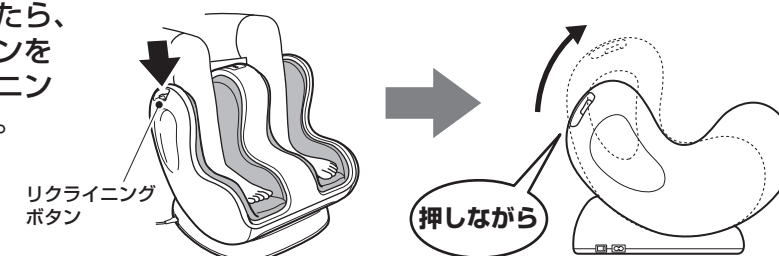

5 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。

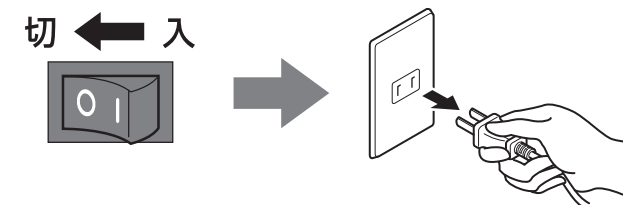

- 長期間使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。
- また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。



お手入れのしかた

次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。
必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

本 体

乾いたやわらかい布でふき取る。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼって汚れなどをふき取ってから、やわらかい布でからぶきする。

クッションカバー


やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤をふくませ、よくしぼってからふき取り、乾燥させる。

クッションカバーの汚れが気になるときは

クッションカバーの汚れが気になるときは、本体から取り外して洗濯機で洗ってください。

※内布は取り外しできません。

- ①ファスナーを開けてクッションカバーを本体から取り外す。
- ②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を使って洗濯機で洗い脱水する。
- ③陰干しで十分に乾燥させる。
- ④完全に乾いてから、取り外しの逆の手順で本体に取り付ける。（クッションカバーに左用／右用はありません）

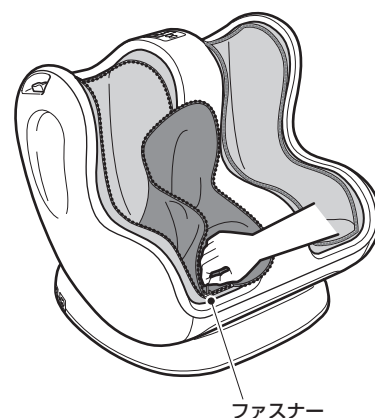

ご 注 意

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
- ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などをよごれ落としとして使わない。
- クッションカバーは、他のものと一緒に洗わない。色落ちする場合があります。
- クッションカバーを乾燥機にかけない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。（14ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
電源が入らない。 動かない。	● 電源プラグが抜けている。	● 電源プラグを確実に差し込む。
	● 電源スイッチが入っていない。	● 電源スイッチを入れる。
	● 入/切ボタンを長押ししていない。	● 入/切スイッチを3秒押す。
停止してしまった。	● コース選択後、15分以上経っている。（自動停止した）	● 故障ではありません。 ※使用時間は1回15分以内にしてください。
マッサージ中の音が気になる。		構造上、音が出ることがあります。機能に影響はありませんので、そのままお使いください。
クッションカバーが破れた。		ただちに使用を中止し、専用の別売品と交換してください。 別売品のお取り寄せについては、お買い上げ販売店、または弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。（14ページ参照）
電源コードが破損した。		
内布が破れた。		ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。（14ページ参照） ※本製品の分解・修理は絶対にしないでください。
こげくさい臭いがする。 本体が破損した。		

廃棄について

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

仕 様	販 売 名	エアーフットマッサージャー TF5000	類 別	機械器具 77 バイブレーター
	電 源	AC100V 50/60Hz	一般的名称	家庭用エアマッサージャー (JMDNコード 34663000)
	消 費 電 力	40W	医療機器分類	管理医療機器
	定 格 時 間	15分	医療機器認証番号	227AGBZX00019000
	内蔵タイマー	約15分	医 療 機 器	株式会社惣田製作所
	質 量	約13kg	製造販売業	〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492
	寸法(mm)	通常時：高さ480×幅490×奥行き450 リクライニング時：高さ400×幅490×奥行き510	材 質	本体：ABS樹脂 布地：ポリエステル、ポリウレタン
	電源コード長さ	約1.9m	足 サイズ	21.5cm～28cm
	エアー圧力	30～50kPa		
	使用目的／ 効能・効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。 ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解		

日本製



アフターサービス

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7