

Máy tẩy tế bào da bằng sóng siêu âm


NTE21

Hướng dẫn sử dụng

Cám ơn quý khách đã mua hàng.

Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và sử dụng sản phẩm đúng cách.

Sau khi đọc, hãy giữ hướng dẫn sử dụng ở nơi người dùng sản phẩm có thể tìm thấy dễ dàng.

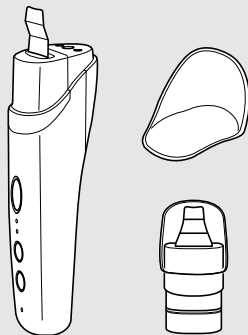

Mục lục

Các cảnh báo an toàn1-3

Tên và Chức năng các Bộ phận4, 5

Thông số kỹ thuật5

Sạc pin.....6

Khuyến cáo khi sử dụng7

Cách sử dụng8-13

Thiết bị an toàn/

Đặt thời gian sạc/

Vệ sinh13

Cách tháo Pin Niken-Hydrua kim loại

(khi xử lý)14

Xử lý sự cố15

Các cảnh báo an toàn

- Đảm bảo đọc những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng, và sử dụng sản phẩm đúng cách
- Các cảnh báo được liệt kê ở đây nhằm đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng cách, an toàn và tránh gây thương tích cho người sử dụng hoặc người khác hoặc tránh gây thiệt hại về tài sản. Hãy chắc chắn tuân theo chỉ dẫn của các cảnh báo.

Nguy hiểm

Tuyệt đối không sử dụng cùng với các thiết bị điện tử y tế sau đây.

- Máy tạo nhịp tim hoặc các thiết bị điện tử y tế khác được cấy vào cơ thể
 - Điện tâm đồ hoặc các thiết bị điện tử y tế có thể tháo rời khác.
- Có nguy cơ làm hỏng thiết bị điện tử y tế.

Báo động

Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Các vấn đề về tim
- Bệnh cấp tính (đau)
- Sốt
- Huyết áp bất thường
- Bệnh truyền nhiễm
- Bệnh lao
- U ác tính
- Chứng đau dây thần kinh vùng mặt
- Mang thai
- Khi đến kỳ kinh nguyệt
- Viêm da cơ địa
- dị ứng
- Da đặc biệt nhạy cảm
- Rối loạn đông máu
- Đang điều trị nha khoa
- Bị giãn nở mao quản do điều trị hormone steroid dài hạn hoặc rối loạn chức năng gan
- Đang chịu ảnh hưởng của thuốc hoặc rượu, hoặc cực kỳ mệt mỏi

Không sử dụng ở các khu vực sau đây.

- Các khu vực đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ
- Nhấn cầu và mí trên
- Chấn thương
- Vùng da mặt bị hắc tố
- Bên trong miệng hoặc các vùng niêm mạc khác
- Khu vực bị viêm mụn trứng cá hoặc các mụn nhọt khác
- Những khu vực bị suy giảm cảm giác đau hoặc nhận thức đau
- Khu vực có kim loại, nhựa, silicone hoặc các vật khác dưới da
- Khu vực bị ngứa, phát ban hoặc các vết khác do kích thích vật lý
- Khu vực bị viêm do trang điểm hoặc vì các lý do khác
- Xung quanh mắt và tai

Không sử dụng sản phẩm trên vết thương hoặc vùng viêm da.

Có nguy cơ bị ngắt kết nối dây nguồn khi sử dụng không đúng cách hoặc trong thời gian dài, vì vậy không sử dụng sản phẩm trong các trường hợp sau:

- Khởi động và dừng lặp đi lặp lại trong quá trình vận hành.
- Không cắm hết phích vào ổ cắm.
- Nếu dây nguồn bị xoắn và không gỡ lại đúng cách.
- Nếu chân dây nguồn hoặc bộ sạc bị cong hoặc bị hỏng.

Không làm hỏng dây nguồn. (Không xoắn, uốn cong, hoặc kéo dây quá mức cần thiết, không đặt vật nặng lên dây, không đặt gần nguồn nhiệt, không bó, ép dây và sửa đổi dây)

Giữ bộ sạc khi tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm.

Không quấn dây nguồn xung quanh bộ sạc.

Thiết bị này không sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về an toàn cho họ.

Bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ, không để trẻ em chơi với thiết bị này.

Không sử dụng trên bề mặt dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Sử dụng với điện áp từ 100 đến 240V AC.

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu trong khi sử dụng sản phẩm hoặc bị các vấn đề về da sau khi sử dụng sản phẩm, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến chuyên gia y tế.

Nếu sản phẩm phát ra tiếng ồn bất thường hoặc xảy ra một số bất thường khác, hãy ngừng sử dụng ngay.

Làm theo hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn về tần suất và thời gian sử dụng.

Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, hãy theo dõi tình trạng da.

Tháo bộ sạc ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng.

Không cầm hoặc tháo bộ sạc bằng tay ướt.

Không rửa bằng nước. Không để sản phẩm trong nước hoặc tráng bằng nước.

Không thả vào trong nước. Không để trong nước. Không để sản phẩm bị ướt.

Không sử dụng hoặc cất bộ sạc trong phòng tắm hoặc khu vực có độ ẩm cao.

Không sửa đổi sản phẩm. Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm nếu bạn không phải là kỹ thuật viên sửa chữa.

Không được thay pin có thể sạc lại của sản phẩm này.

Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hoặc các bình chứa nước khác.

Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm điện sau khi sử dụng vì sử dụng gần nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi thiết bị đã được tắt.

Để bảo vệ thêm, cần lắp đặt thiết bị ngắt dòng điện dư (RCD) có dòng điện hoạt động dư không vượt quá 30 mA trong mạch điện cấp cho phòng tắm.

Hỏi người lắp đặt để được tư vấn.

Cảnh báo

Không sử dụng đồng thời với các sản phẩm làm đẹp khác.

Không để rơi hoặc va đập vào sản phẩm.
Không tác động mạnh lên sản phẩm.

Không lau sản phẩm bằng xăng, dung môi pha loãng sơn hoặc cồn, không phun chất tẩy rửa lên sản phẩm.

Chỉ sử dụng với bộ sạc (TAD28 hoặc TAD29) và đầu cắm chuyên dụng. Không sử dụng bộ sạc và đầu cắm chuyên dụng với các sản phẩm khác.

Không sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại. Không đặt sản phẩm ở nơi không xác định được số người có thể sử dụng.

Không sử dụng nếu sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng.

Không dùng chung với gia đình hoặc người lạ.

Không sử dụng trên da khô.

Không sử dụng trên các vùng da vừa tẩy lông.

Không được để đầu chà tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoài da.

Không cất trữ cùng với nước tồn đọng trong bình nước.

Không cất trữ trong phòng tắm hoặc khu vực có độ ẩm cao.

Tháo kính áp tròng và phụ kiện như bông tai và dây chuyền trước khi sử dụng.


Khi da quá thô hoặc bề mặt không đều, hoặc khi được sử dụng trên các vùng có lông hoặc râu, sản phẩm có thể có tác động quá mạnh. Trong trường hợp đó, tránh sử dụng nó trên những khu vực này.

Khi sử dụng đầu chà, hãy di chuyển xung quanh và không đặt ở cùng một vị trí.

Đậy nắp thân máy khi bảo quản.

Giữ chắc chắn phần thân khi cầm sản phẩm.

Tên và chức năng của các bộ phận

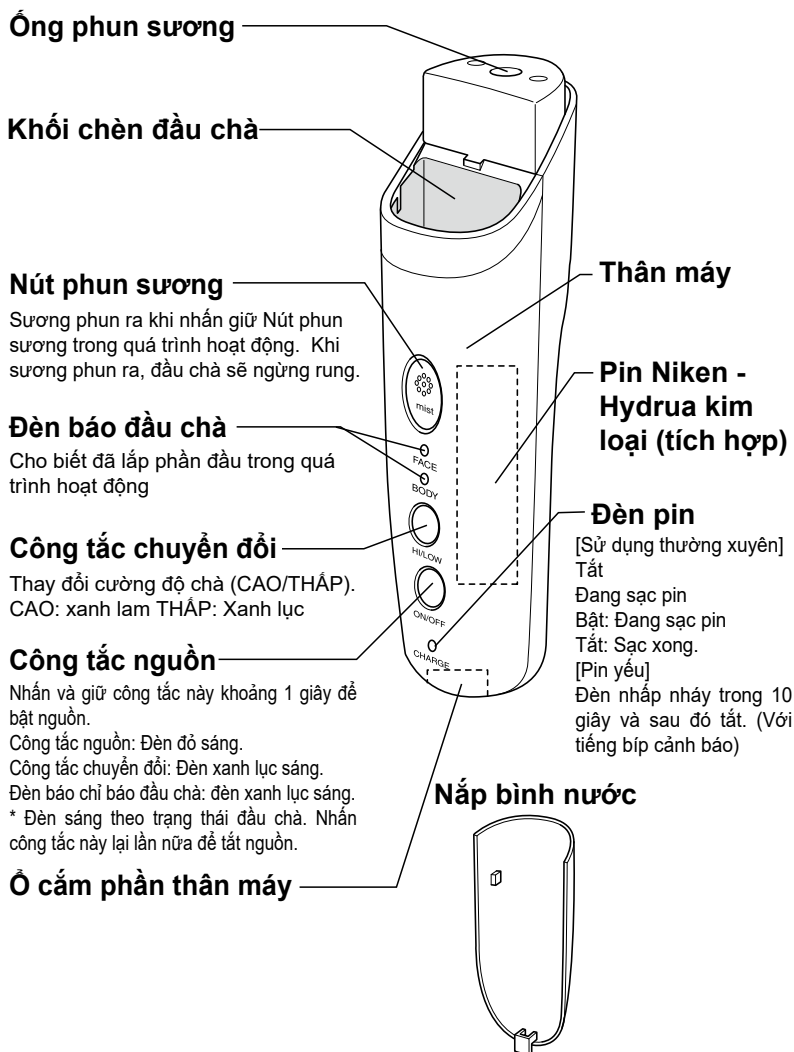


Tên và chức năng của các bộ phận

■ Phụ kiện


Nắp phần thân

Lắp vào để giữ phần thân

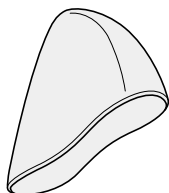

Nắp phụ

Lắp vào để giữ cho đầu chà dành cho MẶT hoặc dành cho CƠ THỂ tách biệt

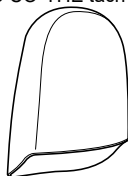

Đầu chà dành cho CƠ THỂ




Đầu chà dành cho MẶT



Lưới
đầu chà

Bộ sạc

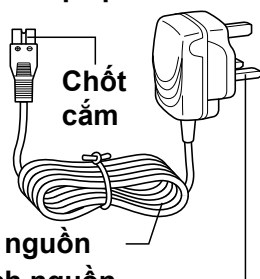

Chốt
cắm


Dây nguồn
Phích nguồn

"Phích cắm loại G (TAD28)
Phích cắm loại C (TAD29)"

Nắp bình nước

Bình nước

Nhựa trao đổi
ion

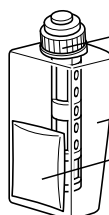

* Thay bình nước định kỳ bằng bình mới

Thông số kỹ thuật

Tên bộ phận		Ultrasonic Peeling	10 phút (tự động tắt)
Mã bộ phận		NTE21	Khoảng 5h
Nguồn cấp điện	Bộ sạc	100-240 V ~ 50-60 Hz	5,5 V ~ 600 mA
	Thân máy	Pin Niken - Hydrua kim loại (3,6 V ~ 800 mA) 1 bộ	

Sạc pin

* Không sử dụng trong khi sạc.

1 Đảm bảo rằng công tắc nguồn tắt. Sau đó, cắm bộ sạc vào thân máy và ổ cắm.

- Đèn báo dung lượng pin sáng.
- Không cắm chốt cắm vào ổ cắm trên thân máy bằng lực quá mạnh hoặc cố dùng lực để cắm nghiêng. Nếu bạn làm như vậy, ổ cắm có thể bị hỏng.
- Đảm bảo điện áp nguồn từ 100 đến 240 V.

2 Sau khi đèn pin tắt, hãy rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm và thân máy.

- Thời gian chuẩn để sạc là 5 giờ.
- Thân máy và bộ sạc có thể hơi nóng; đó không phải là hỏng hóc.
- Pin được sạc đầy một lần cho phép thiết bị chạy khoảng sáu lần (khoảng 10 phút cho mỗi lần). (Số lần có thể giảm, tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng thiết bị, ví dụ như cách bạn vệ sinh thiết bị.)

Cách kéo dài tuổi thọ Pin Niken - Hydrua Kim loại

- Khi cất trữ sản phẩm, hãy sạc đầy pin trước khi bảo quản.
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài, vẫn phải sạc sáu tháng một lần.

Khi thời gian hoạt động sau khi sạc trở nên rất ngắn, quy trình sau đây có thể giúp làm mới pin và cải thiện thời gian hoạt động.

- (1) Nhấn nút nguồn và nút sương mù đồng thời 10 giây trở lên.
- (2) Ngừng nhấn khi nghe tiếng bíp và kiểm tra đảm bảo rằng đèn báo dung lượng pin đang nhấp nháy.
- (3) Sạc cho đến khi đèn báo dung lượng pin tắt.
Sau đó, hãy sử dụng như bình thường.

Nếu vẫn không thể sử dụng được ngay cả khi đã thực hiện quy trình trên, pin nickel-hydrua kim loại có thể đã hết thời hạn sử dụng. Vui lòng liên hệ với cửa hàng đã mua.

Khuyến cáo khi sử dụng

⚠ CHÚ Ý

Tránh sử dụng thiết bị này cùng với các thiết bị điện y tế dưới đây.

Không thực hiện theo các hướng dẫn này có thể khiến thiết bị gặp trục trặc

- Thiết bị điện y tế cấy ghép (ví dụ máy tạo nhịp tim)
- Thiết bị điện y khoa có thể đeo (ví dụ, điện tâm đồ)

⚠ CẢNH BÁO

Nếu sử dụng trong những trường hợp sau đây, hãy đảm bảo phải tham khảo ý kiến bác sĩ.

Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

- Người bị tổn thương tim mạch
- Người bị bệnh cấp tính (đau)
- Người bị sốt
- Người mắc chứng huyết áp bất thường
- Người mắc bệnh truyền nhiễm
- Người mắc bệnh lao
- Người bị u ác tính
- Người bị đau mắt
- Người đang mang thai
- Trong kỳ kinh nguyệt
- Người bị viêm da cơ địa
- Người bị dị ứng
- Người có làn da đặc biệt nhạy cảm
- Người mắc chứng rối loạn đông máu
- Đang điều trị nha khoa
- Người mắc bệnh giãn mạch vành do sử dụng lâu dài một chất hóc môn steroid hoặc do rối loạn chức năng gan.
- Người đã uống rượu, uống thuốc hoặc trong tình trạng rất mệt.

Thiết bị này không được sử dụng ở bất kỳ vùng nào sau đây.

Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

- Vùng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ
- Nhân cầu và mí mắt trên
- Vết thương
- Tầng sắc tố da mặt
- Các vùng niêm mạc (ví dụ như bên trong miệng)
- Các vùng bị viêm do mụn trứng cá hoặc mụn nhọt
- Các vùng bị suy giảm cảm giác đau hoặc xáo trộn về nhận thức
- Các vùng dưới da có kim loại, nhựa, silicone hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Các vùng có các đốm màu bị viêm do ngứa, mẩn đỏ, kích thích vật lý, hoặc các bệnh khác
- Các khu vực bị viêm bởi mỹ phẩm hoặc các sản phẩm tương tự

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với da hoặc cơ thể, hãy ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.

Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc tác dụng phụ.

*** Chăm sóc da với thiết bị này nên được thực hiện không quá một lần mỗi ngày, và thời gian sử dụng nên kéo dài trong vòng 10 phút cho một lần. Số lần sử dụng là một hoặc hai lần một tuần.**

Không sử dụng thiết bị liên tục quá 10 phút để tránh gây hại cho da.

Tẩy trang mặt của bạn để làm sạch lớp trang điểm.

- Rửa sạch lớp trang điểm bằng nước tẩy trang

Sử dụng thiết bị này trên da không còn lớp trang điểm.

Sử dụng thiết bị trên da đã được làm ẩm bằng nước hoặc sương.

Cách sử dụng

 CẢNH BẢO	Không sử dụng thiết bị này để chăm sóc xung quanh mắt hoặc tai. (Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc các phản ứng phụ).
	Nếu da của bạn bị thương tích hoặc vết thương, tuyệt đối không được sử dụng thiết bị trong bất kỳ trường hợp nào. (Không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến các vấn đề về da hoặc thương tích.)


Chăm sóc da bằng thiết bị này nên được thực hiện không quá một lần một ngày, và thời gian sử dụng chỉ trong vòng 10 phút cho một lần. Số lần sử dụng là một hoặc hai lần một tuần. 10 phút sau khi nhấn công tắc nguồn, nguồn sẽ tự động tắt.

1 Tháo nắp thân máy


2 Lắp đầu chà dành cho CƠ THỂ hoặc MẶT của phụ kiện lên thân máy. Lắp hết đầu chà vào phía sau.

*** Khi bạn nhận được sản phẩm, thân máy đã lắp đặt sẵn đầu chà dành cho CƠ THỂ.**


- Không tháo phần đầu khi bật nguồn.
- Nếu không lắp hoàn chỉnh hoặc chưa lắp đầu máy thì không thể bật nguồn.
- Trong khi sử dụng thiết bị, điện bị ngắt do hoạt động của thiết bị an toàn nếu nước lọt vào khối chèn đầu chà trong lúc thay đầu chà hoặc phần đầu chà không được lắp đặt hoàn chỉnh. Đây không phải là hỏng hóc.
- Để tháo phần đầu chà, đặt thiết bị nghiêng như trong hình và kéo đầu chà ra từ từ trong khi dùng tay giữ hai bên. Kéo đầu chà bằng tay ướt hoặc với đầu chà hướng về phía mặt bạn có thể dẫn đến thương tích do lưới đầu chà.
- Khi tháo phần đầu chà, không được giữ lưới đầu chà. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể làm hỏng thiết bị.

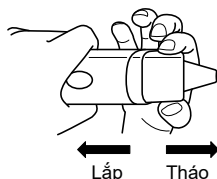

3 Tháo nắp bình nước ra từ mặt sau và lấy bình nước ra.

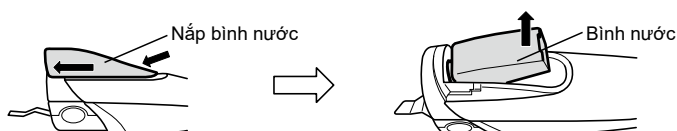


- 4 Tháo nắp bình nước.** Sau đó, đổ nước tinh khiết hoặc nước có thể uống vào bình đến giới hạn trên của mực nước. Vặn chặt nắp bình nước. Sau đó, lau nước nhỏ giọt khỏi bình trước khi lắp vào thân máy.

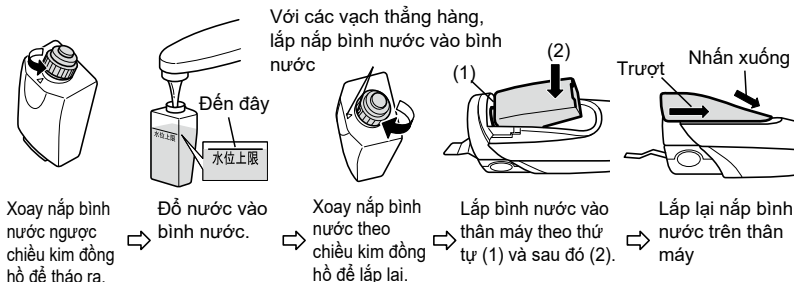

- Nếu da của bạn ẩm hoặc bạn không sử dụng chức năng phun sương, bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần đổ nước vào bình. Lưu ý rằng khi không có nước trong bình, nút phun sương trong quá trình chà sẽ không phun sương.
- Không được sử dụng loại nước nào khác ngoài nước tinh khiết hoặc nước uống được.

5 Nhấn và giữ công tắc nguồn để bật nguồn.

- Thiết bị phát ra một tiếng bíp ngắn và xác nhận đã lắp phần đầu chà, do đó đèn báo hiệu bật sáng.
- Nguồn điện tự động tắt khoảng 10 phút sau khi nhấn công tắc nguồn.
- Nếu bạn đã gắn phần đầu chà lên thân máy bằng khối chèn đầu chà có nước, nhấn và giữ công tắc nguồn có thể không bật được nguồn do hoạt động của thiết bị an toàn.

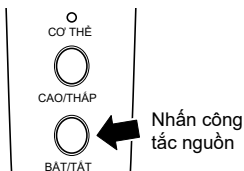


6 Chọn cường độ chà bằng cách nhấn Công tắc Chuyển đổi. Chế độ CAO/THẤP được bật mỗi lần nhấn công tắc này.


Cài đặt sẵn chế độ "THẤP" ngay sau khi khởi động.

CAO: Xanh lam THẤP: Xanh lục

- Khi bắt đầu sử dụng, nên thiết lập "THẤP" để sử dụng thiết bị trong thời gian ngắn.
- Ngừng sử dụng thiết bị nếu bạn cảm thấy không thoải mái

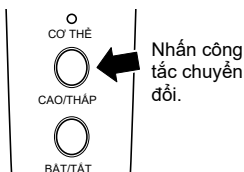

- 7** Sương sẽ phun ra khi nhấn nút phun sương để làm ẩm da. (Điều này không cần thiết khi da đã ẩm sau khi tắm hoặc rửa, v.v...) Nhẹ nhàng đặt đầu chà vào da ẩm và di chuyển xung quanh.

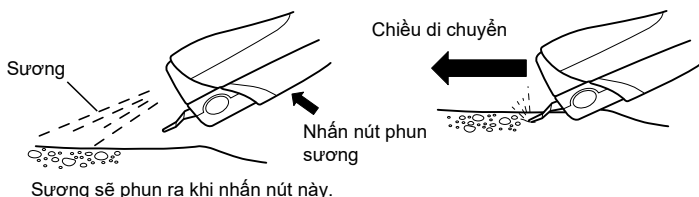

Điều chỉnh độ nghiêng của lưới chà để phun sương trên da.


- Thiết bị này phải được sử dụng trên da trần, không trang điểm.
- Nếu bạn cảm thấy bất kỳ rối loạn nào trong quá trình chăm sóc trong hoặc sau khi sử dụng thiết bị (ví dụ: mẩn đỏ, phát ban, ngứa), ngừng sử dụng ngay và hỏi ý kiến chuyên gia y tế.
- Không sử dụng thiết bị nhiều lần trên cùng một vùng da
- Đảm bảo làm ẩm da trước khi tẩy tế bào da.
- Khi sử dụng thiết bị, không nên ấn đầu chà lên da bạn bằng lực quá mức.
- Bất cứ khi nào bạn thấy bụi bẩn trên phần kim loại của đầu chà, hãy lau bằng khăn bông hoặc khăn mềm.
- Nếu bình nước không chứa nước thì sẽ không thể phun sương.
- Nếu có những giọt nước lớn trên đầu chà, những giọt bám trên da sẽ khó tỏa ra khi chuyển thành sương. Trong trường hợp này, hãy lau sạch nước nhỏ giọt.
- Khi nhấn giữ nút phun sương, đầu chà sẽ ngừng rung. Đây không phải là hỏng hóc.
- Dùng đầu chà làm dẫn hướng khi trượt, di chuyển với vận tốc 10cm trong 3 giây mà không dừng trên cùng một vị trí.

- 8** Sau khi sử dụng, tắt công tắc nguồn. Lấy bình nước ra, và vệ sinh phần đầu chà và thân máy. (Xem trang 13)
Sau khi bên trong bình nước đã khô hoàn toàn, lắp lại nắp phần thân và nắp phụ và cất thiết bị ở nơi có độ ẩm thấp.

* Đổ hết nước ở bình sau mỗi lần sử dụng và để bình khô hoàn toàn.

[Sử dụng đầu dành cho MẶT]


- (1) Lắp đầu chà dành cho MẶT lên thân máy. Chắc chắn rằng khi bạn bật công tác nguồn, đèn báo ở đầu chà dành cho MẶT sáng.
- (2) Bằng cách nhấn nút phun sương, sương phun ra sẽ làm ẩm da bạn.
 - Cần thận để tránh đầu chà chạm vào da bạn.
- (3) Đặt nhẹ nhàng đầu chà lên da, trượt từ từ từ dưới lên trên.
 - Trong khi sử dụng thiết bị, bạn sẽ nghe thấy âm thanh kim loại liên tục, đây không phải là dấu hiệu hỏng hóc.

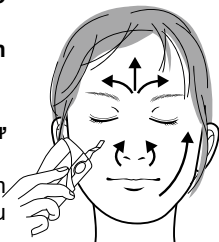

• Các đường trên khuôn mặt



• Hàm và quanh miệng

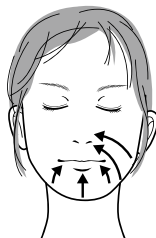

• Má



• Xung quanh mũi




- (4) Sau khi sử dụng, hãy tiếp tục thực hiện chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn.
 - Dưỡng da của bạn bằng kem dưỡng da, bổ sung dầu hoặc sữa dưỡng da hoặc các sản phẩm tương tự.
- (5) Sau khi sử dụng, hãy lau vết bẩn và cặn bẩn ở phần đầu bằng vải mềm hoặc khăn giấy.


[Sử dụng đầu chà dành cho CƠ THỂ]

- (1) **Lắp đầu chà dành cho CƠ THỂ lên thân máy.**
 Khi bạn bật công tắc nguồn, hãy đảm bảo đèn báo ở đầu chà dành cho CƠ THỂ sáng.
- (2) **Khi nhấn nút phun sương, sương phun ra sẽ làm ẩm da**
 - Cần thận để tránh đầu chà chạm vào da bạn.
- (3) **Đặt đầu chà nhẹ nhàng lên da, trượt từ từ ra ngoài.**
 - Khi sử dụng thiết bị, bạn sẽ nghe thấy âm thanh kính loại liên tục, đây không phải là hỏng hóc.

• Đầu gối

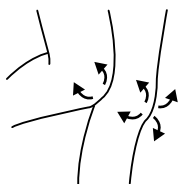

• Gót chân

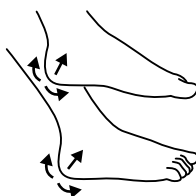

• Khuỷu tay




- (4) Sau khi sử dụng, hãy bổ sung dầu cùng kem hoặc các sản phẩm khác để duy trì độ ẩm.
- (5) Sau khi sử dụng, lau sạch bụi bẩn, cặn bẩn khỏi đầu chà bằng vải mềm hoặc khăn giấy.

Tính năng sử dụng nâng cao

• Kỹ thuật

- Sử dụng đầu chà dành cho MẶT
- (1) **Khi nhấn nút phun sương, sương phun ra sẽ làm ẩm làn da bạn**
 - Cần thận để tránh đầu chà chạm vào da bạn.

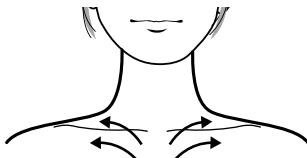

- (2) **Đặt đầu chà nhẹ nhàng lên da, trượt từ từ lên trên.**
- (3) **Sau khi sử dụng, hãy bổ sung dầu cùng kem hoặc các sản phẩm khác để duy trì độ ẩm.**

[Thiết bị an toàn]

- Nếu nước tràn vào khối chèn đầu chà, có thể không bật hoặc tắt nguồn được do tác dụng của thiết bị an toàn.
→ Để xử lý trong trường hợp này, tháo đầu chà khỏi thân máy, xả hết nước khỏi đầu chà và khối chèn đầu chà, lau sạch, lắp lại đầu chà vào vị trí ban đầu và nhấn công tắc nguồn để khôi phục chế độ hoạt động bình thường.


[Đặt thời gian sạc]

- Đèn pin nhấp nháy báo hiệu trạng thái pin yếu (khi bật nguồn), khi đó tiếng bíp phát ra liên tục trong vòng 10 giây và nguồn sẽ tắt.
→ Sạc pin ngay lập tức.
- Sản phẩm này có thể được sử dụng với nguồn điện xoay chiều từ 100 đến 240 V.


[Vệ sinh]

- Đảm bảo đã tắt nguồn và tháo bộ sạc. Sau đó bắt đầu vệ sinh máy.
- Phân thân máy, đầu chà, khối chèn đầu chà. Lau sạch bụi và cặn bẩn bằng vải mềm.
- Nếu khó lau sạch bụi bẩn hoặc cặn bẩn trên thân máy, hãy ngâm một miếng vải mềm trong dung dịch xà bông và nước hoặc chất tẩy trung hòa pha loãng bằng nước, và vắt kiệt. Sau đó, sử dụng vải này để lau bụi bẩn trên thân máy.

• Thân máy

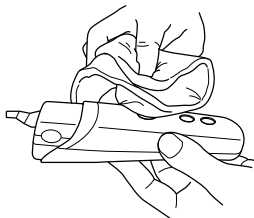


• Đầu

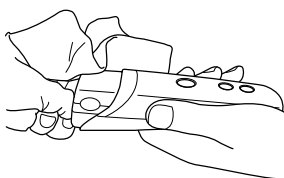


Dùng vải khô mềm để lau khối chèn đầu chà.

* Không được sử dụng vải ướt để lau khối chèn.

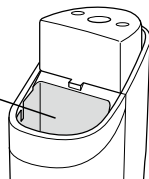

• Lưỡi chà

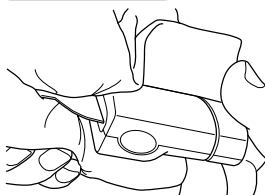

• Bình nước và nắp bình nước


Tháo bình nước. Sau khi để khô tự nhiên, hãy lắp lại bình vào thân máy.

Cách tháo pin Niken hydrua kim loại (khi xử lý)


Phần này giải thích cách xử lý pin thải. Đây không phải phần giải thích để người dùng thay pin. Người dùng không được thay pin này.

- 1 Nhấn công tắc nguồn và nút phun sương đồng thời 10 giây trở lên. Ngừng nhấn khi nghe tiếng bíp và kiểm tra đảm bảo đèn báo dung lượng pin đang nhấp nháy. Sạc cho đến khi đèn pin tắt.


- 2 Tháo nắp thân máy, nắp bình nước và bình nước. Tháo nắp cao su (6) khỏi phần thân sau.

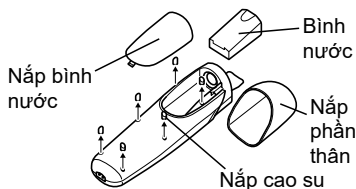


- 3 Tháo các vít (6).

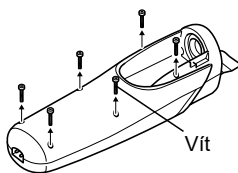

- 4 Luồn tua vít đầu dẹt vào khoảng giữa phần thân trước và phần thân sau để tháo mặt sau.

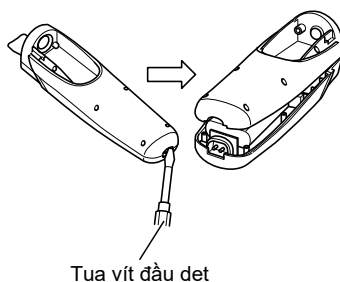

- 5 Tháo đầu nối dây dẫn nối pin niken hydrua kim loại với bo mạch và kéo pin ra

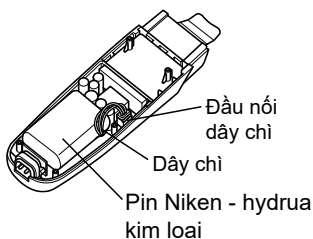

● Pin có thể sạc lại (Pin Niken - hydrua kim loại)

Hãy tái chế pin tháo ra theo quy định địa phương vì pin này chứa các nguồn tài nguyên quý giá.

Tên sản phẩm: Nickel-Metal Hydride Battery (Ni-MH)

Điện áp danh định: 3,6 V $\cdots$

Số lượng: 1 set



Xử lý sự cố

Các vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp xử lý
Không bật nguồn được mặc dù đã nhấn công tắc nguồn	Điều này có nghĩa là thiết bị an toàn đang hoạt động	Tham khảo "Thiết bị an toàn" trên trang 13.
Nguồn tắt khi đang hoạt động		
Không phun sương	Không lắp bình nước đúng cách.	Hãy cố gắng lắp lại bình nước.
Lưỡi đầu chà không rung	Không lắp đầu chà đúng cách.	Lắp lại đầu chà.
Đèn sạc sáng và tắt khi dây nguồn bị uốn cong	Dây nguồn gần bị đứt.	
Có sự cố hoặc hỏng hóc khác		Ngay lập tức ngừng sử dụng và liên hệ với cửa hàng mà bạn mua sản phẩm
Không thể sạc pin. (Đèn báo dung lượng pin sáng)	Gần hết vòng đời sử dụng pin Niken - hydrua kim loại.	
Không thể sạc pin (Đèn báo dung lượng pin không sáng)	Bộ sạc bị lỗi	
Ngừng hoạt động ngay sau khi sạc	Sạc thiết bị khi còn lượng điện lớn. (Sạc bổ sung)	Sạc lại sau khi ngừng sử dụng pin có thể sạc lại một thời gian. (Xem trang 6)